



## **D** Gebrauchsanweisung

T.E.N.S - Schmerztherapie

Vor Gebrauch des Gerätes bitte genau durchlesen!

Artikel Nr. 4504

Model AD-2014

## **GB** Instruction Manual

T.E.N.S. - Pain therapy

Please read before using!

Item No. 4504

Model AD-2014

## **F** Mode d'emploi

TENS Thérapie de la douleur

A lire attentivement avant d'utiliser l'appareil

Article n° 4504

Model AD-2014

## **NL** Gebruiksaanwijzing

T.E.N.S - Pijntherapie

Vóór het gebruik a.u.b. eerst grondig lezen!

Artikelnr 4504

Model AD-2014

## **I** Istruzioni per l'uso

T.E.N.S - Terapia del dolore

Si prega di leggere attentamente prima dell'uso!

Articolo n. 4504

Modello AD-2014

## **E** Instrucciones servicio

TENS - Escalera analgésica

¡Léalas detenidamente antes de la primera utilización!

Artículo. 4504

Modelo AD-2014

# Inhaltsverzeichnis

## DEUTSCH

Einleitung TENS .....	6
Inhalt und Displayanzeigen .....	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	8
Kontraindikationen .....	8
Produktbeschreibung .....	9
Spezifikationen .....	9
Therapie .....	10
Achtung .....	10
Vorbereitung und Anweisungen zur Anwendung .....	12
Problembeseitigung .....	15
Instandhaltung .....	16
Erklärung der Symbole am Gerät .....	17
Gewährleistung .....	17
Adresse für Gewährleistung und Service .....	18

## ENGLISH

Introduction of TENS .....	19
Contents and display indicators .....	20
Intended use .....	21
Contraindication .....	21
Product description .....	21
Specifications .....	22
Therapy mode .....	23
Notice .....	23
Setup and operating procedures .....	24
Troubleshooting .....	27
Maintenance .....	28
Explanation of symbols on unit .....	29
Warrenty information .....	29
Address for guarantee claims and service .....	29



## FRANÇAISE

Entrée en matière TENS .....	30
Contenu et affichage .....	31
Domaine d'utilisation .....	32
Contre-indications .....	32
Désignation produit .....	33
Spécifications .....	33
Thérapie .....	34
Attention .....	34
Préparation et conseils d'utilisation .....	36
Problème à écarter .....	39
Entretien .....	40
Explications des symboles sur l'appareil .....	41
Garantie .....	41
Adresse pour la garantie et le Service Après-vente .....	42



## NEDERLANDS



Inleiding TENS .....	43
Inhoud en meldingen op het display .....	44
Gebruik volgens de bestemming .....	45
Contra-indicaties .....	45
Productbeschrijving .....	46
Specificaties .....	46
Thérapie .....	47
Pas Op .....	47
Voorbereiding en aanwijzingen voor gebruik .....	49
Problemen verhelpen .....	52
Onderhoud .....	53
Verklaring van de symbolen op het apparaat .....	54
Garantie .....	54
Adres voor garantie en service .....	55





## ITALIANO

Introduzione TENS.....	56
Contenuto e indicazioni sul display.....	57
Uso conforme allo scopo previsto.....	58
Controindicazioni.....	58
Descrizione del prodotto.....	59
Specificazioni.....	59
Terapia.....	60
Attenzione.....	60
Preparazione e indicazioni per l'applicazione.....	62
Problemi e la loro risoluzione.....	64
Manutenzione.....	65
Spiegazione dei simboli sull'apparecchio.....	66
Garanzia.....	66
Indirizzo per garanzia e manutenzione.....	67



## ESPAÑOL



Introducción TENS.....	68
Contenido y pantalla del dispositivo.....	69
Uso adecuado.....	70
Contraindicaciones.....	70
Descripción del producto.....	71
Especificaciones.....	71
Terapia.....	72
Atención.....	72
Preparación y consejos para el uso.....	73
Solución de problema.....	76
Mantenimiento.....	77
Descripción de los símbolos del aparato.....	78
Garantía.....	79
Dirección para asuntos relacionados con la garantía.....	79



## Einleitung TENS

### Die Theorie der Behandlung

Transkutane elektrische Nerven Stimulation (TENS) ist eine nicht invasive Technik, bei der elektrischer Strom von einem Reizstromgerät über kleine Kabel zu den auf der Haut platzierten Elektroden übertragen werden. Die selbsthaftenden Elektroden können je nach den spezifischen Anforderungen oder Behandlungszielen in unterschiedlichen Variationen angelegt werden. TENS wird oft als Alternative oder als Ergänzung zur üblichen Schmerzbehandlung eingesetzt. Die Behandlungen können von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden erfolgen. Die Anwendung von elektrischer Stimulation zur Linderung von Schmerzen ist seit dem 19ten Jahrhundert bekannt und wurde in den 1960er und 1970er Jahren mit der Nutzung von batteriebetriebenen Geräten weiter verbreitet.

Transkutane elektrische Nerven Stimulation (TENS) wurde ab 1965 zunächst entsprechend der Kontrollschrankentheorie oder englisch „Gate Control Theory“ nach Melzack und Wall in klinischen Behandlungen zur Schmerzlinderung eingeführt. Davis (1993) und Lewith (1984) erklärten die Kontrollschrankentheorie folgendermaßen. Ein Bereich des Hinterhorns (latein: Cornu dorsale) im Rückenmark, bekannt als „Substantia gelatinosa“ dient als „Tor“ für Impulse auf die Schmerzrezeptoren. Er enthält feinmarksheidenhaltige Nervenfasern (A Fasern), marksheidenhaltige A Fasern, welche auf starke Reize reagieren und nicht marksheidenhaltige Nervenfasern (C Fasern). Wenn Schmerzimpulse feinmarkhaltige A Fasern und die C Fasern passieren ohne Impuls der marksheidenhaltigen A Fasern, ist das „Tor offen“, der Patient spürt Schmerz. Bei Übertragung eines stärkeren Impulses durch die marksheidenhaltigen A Fasern kann das „Tor“ geschlossen werden.

Ebenso ist nachgewiesen, dass Reizstrom die Produktion der körpereigenen natürlichen schmerzstillenden Substanzen Endorphin und Enkephalin fördert. Der menschliche Körper produziert Endorphine und Enkephaline als opiumähnliche Substanz zur Schmerzbekämpfung. Eine niederfrequente Stimulation setzt Endorphine und Enkephaline im Körper frei.

## Warum digitale Schmerzbefreiung in Erwägung ziehen?


Schmerz ist ein Warnsignal- wir brauchen dieses Signal um zu erfahren, dass in unserem Körper etwas nicht in Ordnung ist. Ohne dieses Signal könnten wir nicht wissen, dass in unserem Körper etwas beeinträchtigt sein kann oder weiter geschädigt wird. Haben wir eine Beeinträchtigung identifiziert, hat der Schmerz seinen Zweck erfüllt. Im Falle, dass Schmerzen chronisch werden, kann dies zu signifikanten Beeinträchtigungen der täglichen Aktivitäten und der Lebensqualität führen.

## Wie funktioniert die digitale Schmerzbekämpfung (TENS)?


Die digitale Schmerzbekämpfung (TENS) arbeitet mit harmlosen elektrischen Impulsen, die über die Pads auf den Körper übertragen werden. Dies führt zur Schmerzreduzierung auf zwei Wegen:

- Erstens, wird die Weiterleitung der Schmerzsignale des Körpers, die normalerweise vom Schmerzzentrum über die Nervenfasern an das Gehirn weitergeleitet werden, durch TENS unterbrochen.
- Zweitens, stimuliert TENS die Produktion der körpereigenen natürlichen Schmerzkiller, der Endorphine.


## Inhalt und Displayanzeigen

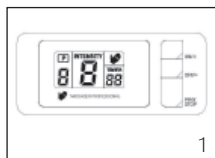


1

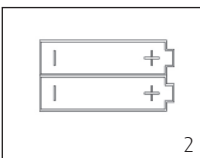

2

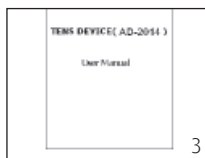

3

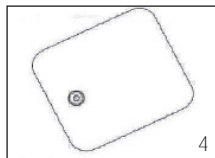


4



5

- 1 TENS Gerät
- 2 Batterien
- 3 Gebrauchsanweisung
- 4 Elektroden (Pads)
- 5 Verbindungskabel

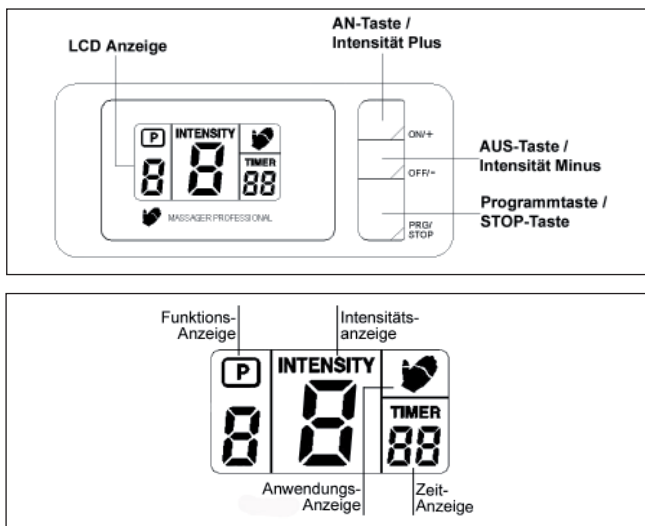

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

AD-2014 ist ein TENS Gerät, welches effektiv zur Schmerzlinderung eingesetzt werden kann.

### Behandlungen:

- Schmerzlinderung
- Muskelstimulation
- Förderung der Blutzirkulation
- Abbau von Ermüdungserscheinungen

## Kontraindikationen

Die Anwendung des Gerätes ist sicher für alle Personen, mit folgenden Ausnahmen oder Personen, die sich in physiotherapeutischer Behandlung befinden.

- Personen mit akuten Erkrankungen

- Krebspatienten
- Personen mit infektiösen Hautwunden
- Personen in der Menstruation oder in der Schwangerschaft
- Personen mit Herzerkrankungen
- Personen mit hohem Fieber
- Personen mit abnormalem Blutdruck
- Personen mit verminderter Hautempfindung und abnormaler Haut
- Personen mit unnormalem Körpergefühl

## Produktbeschreibung

Das AD-2014 ist ein batteriebetriebener Impulsgenerator, der über die Pads elektrische Impulse zum Körper sendet und die darunterliegenden Nerven oder Muskelgruppen erreicht. Das Gerät ist mit einem, in der Intensität steuerbaren Kanal, ausgestattet. Am Kanal kann ein Paar Elektroden angeschlossen werden. Diese können Magnetstreifen auf EC und Kreditkarten sowie magnetische Datenträger beschädigen.

Die Elektronik des AD-2014 erzeugt elektrische Impulse, die sich in der Intensität, Impulsweite und Impulsfrequenz abhängig vom jeweiligen Programm ändern. Das Bedienen der Knöpfe am Gerät ist sehr einfach und die mit der Abdeckplatte abschließenden Knöpfe verhindern ungewollte Veränderungen der Einstellungen.

Das AD-2014 stimmt mit den unten genannten Standards überein:

- EN 60601-1: (Medizinische elektrische Geräte)
  - Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale)
- EN 60601-1-2: (Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen und Prüfungen).

## Spezifikationen

Produkt Name: TENS Schmerztherapie  
 Model: AD-2014 (Artikel 4504)  
 Anzahl Behandlungsprogramme: 9



Bereich der Impulsfrequenzen: 2 - 50Hz  
 Ausgangsspannung: 40V  $\pm$  20%(500 Ohm load)  
 Klassifizierung: Interne Stromversorgung,  
 Typ BF ,IPX0, Kein AP oder APG,  
 Fortlaufende Anwendung  
 Ca.120mm x 52mm x 19mm  
 Gewicht: Ca. 57,6g (exkl. Batterie)  
 Stromversorgung: Batterien: 2 x1.5V Typ AAA

Maße des Gerätes:

Gewicht:

Stromversorgung:

### Umgebungstemperatur

- bei der Anwendung: 5°C - 40°C  
 - für Lagerung und Transport: -20 °C - 55 °C

### Umgebungsluftfeuchtigkeit

- bei der Anwendung: <80%  
 - für Lagerung und Transport: <95%

### Umgebungsluftdruck:

80KPa-105KPa  
 Batterielebensdauer: Ca.2 Monate mit Alkaline Batterien bei  
 30 min. Anwendung täglich.

## Therapie

Prog.	Parameter				Funktion
1	Frequenz=	2Hz.	Impulsweite 220 $\mu$ s.	konstant	Klopfen (Tapping)
2	Frequenz=	10Hz.	Impulsweite 180 $\mu$ s.	konstant	Vibration (langsam)
3	Frequenz=	25Hz.	Impulsweite 145 $\mu$ s.	konstant	Vibration (schnell)
4	Frequenz=	50Hz.	Impulsweite 120 $\mu$ s.	pulsierend	Massage
5	Frequenz=	80Hz.	Impulsweite 85 $\mu$ s.	pulsierend	Massage
6	Frequenz=	100Hz.	Impulsweite 70 $\mu$ s.	konstant	Kneten
7	Frequenz=	120Hz.	Impulsweite 55 $\mu$ s.	pulsierend	Massage
8	Frequenz=	150Hz.	Impulsweite 35 $\mu$ s.	pulsierend	Massage
9	Kombination Pressen und kneten				Automatik



### Achtung

Bei Unwohlsein oder abnormalen Hautreaktionen die Anwendung  
 stop-  
 pen. Einen Arzt konsultieren und die Anweisungen des Arztes befolgen.

- Vor einer Änderung der Position der Pads, während der Anwendung, muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Nicht im Badezimmer oder anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit anwenden.
- Nicht während des Führens eines Fahrzeuges und während des Schlafs anwenden.
- Verbindungskabel und Pads nicht scharf knicken.
- Nicht für andere Anwendungen als für die Vorgegebenen benutzen.
- Während der Anwendung die Pads nicht mit den Metallteilen von Gürtel, Armbanduhr oder Halsketten in Kontakt bringen
- Das Gerät nicht verwenden, wenn Sie an hochfrequenten Operationsgeräten angeschlossen sind oder sich in der Nähe solcher Geräte oder hochfrequenter gewerblicher Anlagen befinden
- Besondere Aufmerksamkeit ist geraten, wenn die Anwendung in unmittelbarer Nähe eines eingeschalteten Funktelefons erfolgt.
- Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Kurzwellen- oder Mikrowellengeräten benutzen. Die Ausgangsspannung des TENS Geräts kann davon beeinflusst werden.
- Dieses TENS-Gerät ist für Erwachsene entwickelt worden. Niemals bei Kleinkindern oder jungen Kindern anwenden. Für eine Anwendung bei Jugendlichen den Physiotherapeuten oder andere Gesundheitsexperten befragen.
- Das Gerät kann seine Funktionen nicht korrekt erfüllen oder kann Sicherheitsrisiken verursachen, wenn es außerhalb der vorgegebenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen gelagert wird.
- Nicht am Herz, im Intimbereich und auf erkrankter Haut anwenden.
- Patienten mit implantiertem elektronischen Geräten, wie Herzschrittmacher oder Herzdefibrillator dürfen das TENS Gerät ohne Anweisung des Arztes nicht verwenden. Schwangere sollten das TENS Gerät während des ersten Vierteljahres der Schwangerschaft nicht verwenden und danach nur nach regelmäßiger Rücksprache mit dem Arzt, der Hebamme oder dem Physiotherapeuten.
- Die Anwendung in der Nähe (z.B. 1m) eines therapeutischen Kurzwellen- oder Mikrowellengerätes kann zu einer instabilen Leistung des TENS Gerätes führen.
- Anwendung der Elektroden nahe am Brustkorb (am Herz) kann das Risiko von Herzflimmern erhöhen
- Nicht herunterfallen lassen, selbst reparieren oder eigenhändig um-

bauen.

- Keine elektrischen Pads von anderen Herstellern verwenden. Dies kann zu veränderten biologischen Bedingungen und damit zu falschen Impulsen führen.
- Bitte die Elektroden nicht mit anderen Personen teilen um die Übertragung von Infektionen zu vermeiden.

## Vorbereitung und Anweisungen zur Anwendung

### 1. Batterien einsetzen

- a Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes öffnen.
- b Zwei Batterien Typ „AAA“ einlegen. Bitte auf die Polarität im Batteriefach achten.
- c Batteriefach schließen.



- Wieder aufladbare Batterien sind für dieses Gerät nicht empfohlen.
- Wenn das Gerät für einen Monat oder länger nicht genutzt wird Batterien entfernen um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern.
- Bitte keine alten und neuen Batterien mischen
- Batterien nicht ins Feuer werfen.

### Entsorgung Altgeräte und Batterien

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

### 2. Anschluss der Verbindungskabel

- a Den Stecker des Kabels in den Anschluss am Gerät AD-2014 stecken. Den isolierten Teil des Steckers festhalten und in die Anschlussbuchse drücken.
- b Die Druckknöpfe am anderen Ende des Kabels mit den Pads verbinden. Druckknöpfe sorgfältig anschließen und trennen. Reisen am Kabel kann das Kabel beschädigen.
- c Die Elektroden am Körper anlegen, wie vom Physiotherapeuten em-

pflohen oder wie in den Beispielen gezeigt.

- Kabel mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Die gelegentliche Verwendung von Talkumpuder verlängert die Lebensdauer der Kabel.



### 3. Bedienungsanleitung


- a Zum Einschalten den Kopf „On/+ „ drücken. Die Anzeige des LCD-Displays leuchtet für eine Sekunde, danach geht das Gerät in den „Stand by Modus und wartet auf weitere Einstellungen.
- b Als Erstes die Anwendungszeit beachten. Die Standardvorgabe ist auf 15 Minuten festgelegt und kann durch den Anwender nicht geändert werden.
- c Als Zweites das Anwendungsprogramm über die Taste „PRG/STOP“ wählen. 9 Programme können gewählt werden. Die Programmnummern steigen bei jedem Drücken der Taste. Nachdem Programm 9 erreicht ist, wechselt die Anzeige wieder auf 1.
- d Danach durch drücken der Taste „ON/+“ die Intensität erhöhen. Das Gerät startet die Anwendung. Achtung: Jede Person verträgt unterschiedliche Intensitäten, deshalb die Intensität langsam und vorsichtig steigern. Wenn die Impulse angenehm sind, nicht mehr steigern.
- e Während der Anwendung blinkt das Symbol mit der Hand in der Anzeige, bis die Anwendung beendet ist.
- f Am Ende der Anwendungszeit schaltet das Gerät automatisch ab.

### Elektroden (Pads) reinigen

- Beim Herausziehen den Stecker festhalten, nicht am Kabel ziehen.
- Zum Abwaschen der Elektroden (Pads) klares Wasser oder zum vorsichtigen Abwischen der Elektroden (Pads) ein feuchtes fusselfreies Tuch verwenden. Keine Bürste oder Fingernägel benutzen, damit die Oberfläche der Elektrode nicht beschädigt wird.

## 4. Darstellung der Anwendungen

## Anwendung Diagramm

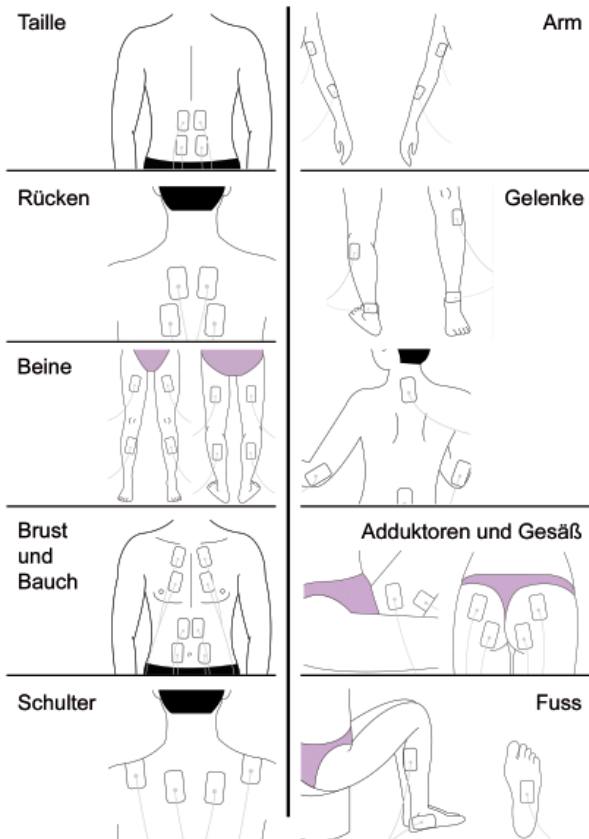

## Problembeseitigung

PROBLEM	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfe
Die Stimulationsimpulse sind nicht wahr zu nehmen.	Sind die Batterien verbraucht?	Batterien wechseln
	Sind die Batterien richtig eingelegt?	Die Batterien entsprechend der Markierung im Batteriefach einlegen.
	Ist das Kabel richtig angeschlossen?	Das Kabel richtig anschließen.
	Ist der transparente Schutzfilm von den Elektroden (Pads) entfernt worden?	Den Schutzfilm von den Elektroden (Pads) entfernen.
Die Stimulationsimpulse sind nur sehr schwach.	Haften die Elektroden (Pads) gut auf der Haut?	Die Elektroden (Pads) gut auf die Haut kleben.
	Liegen die Elektroden (Pads) übereinander	Die Elektroden (Pads) entfernen und erneut auf die Haut kleben.
	Sind die Elektroden (Pads) verschmutzt?	Die Elektroden (Pads) reinigen oder Neue verwenden.
	Ist die Einstellung der Intensität zu schwach?	Die Intensität am Intensitätsregler des Kanals regulieren.
	Sind die Elektroden (Pads) richtig positioniert?	Die Position der Elektroden (Pads) ändern.
Die Haut rötet sich.	Ist die Anwendungszeit zu lang?	Regelmäßig alle 10 - 15 Minuten kontrollieren.
	Haften die Elektroden (Pads) gut auf der Haut?	Die Elektroden (Pads) gut auf der Haut befestigen.

Die Haut rötet sich	Sind die Elektroden (Pads) zu trocken?	Die Elektroden (Pads) mit einem feuchten Tuch abwischen und erneut verwenden. Gut befestigen.
	Sind die Elektroden (Pads) verschmutzt?	Elektroden (Pads) reinigen
	Ist die Oberfläche der Elektroden (Pads) beschädigt oder gebrochen?	Die Elektroden (Pads) durch neue ersetzen.
Die Stimulationsimpulse werden plötzlich unterbrochen.	Haben sich die Elektroden (Pads) von der Haut gelöst?	Gerät ausschalten und die Elektroden (Pads) gut auf der Haut befestigen.
	Haben sich die Kabel gelöst?	Gerät ausschalten und die Kabel erneut verbinden.
	Sind die Batterien verbraucht?	Batterien durch Neue ersetzen.

## Instandhaltung

- Das Gerät nicht herunterfallen lassen oder starken Schlägen aussetzen.
- Hohe Temperaturen und direkte Sonnenstrahlung vermeiden. Nicht in Wasser eintauchen, weil das Gerät davon beschädigt wird.
- Wenn das Gerät in sehr kalten Bereichen gelagert wurde, Gerät vor der Anwendung zunächst auf Raumtemperatur erwärmen.
- Nicht versuchen, dass Gerät auseinander zu bauen
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, die Batterien entnehmen.
- Zum Reinigen des Gerätes nur ein trockenes weiches Tuch verwenden. Keine scheuernden und flüchtigen Reinigungsmittel verwenden.
- Die Komponenten im Gerät können durch den Benutzer nicht gewartet werden.
- Um die Haftkraft der Pads so lange wie möglich zu erhalten, die Pads mit einem feuchten, staub- und flusen freien Tuch reinigen.
- Nach der Anwendung die Elektroden (Pads) wieder auf die Schutzfolie kleben.

- Die Elektroden sind Verschleißartikel. Wenn die Elektroden die Haftkraft verlieren müssen sie durch neue Elektroden (Pads) ersetzt werden.

## Erklärung der Symbole am Gerät




Symbol für den Verweis, die Gebrauchsanweisung zu lesen.



Symbol für „TYP BF „ klassifizierte Geräte



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normales Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem  Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



Symbol für Hersteller



0483 Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EEC

## Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum auf Herstellungsfehler in Material und Qualität. Als Nachweis dient der Kaufbeleg. Diese Gewährleistung ist nur gültig, wenn die Hinweise der Gebrauchsanweisung beachtet werden. Bei Schäden durch Gewaltanwendung, Missbrauch und unsachgemäßer Anwendung oder Service von unberechtigten Personen erlischt die Gewährleistung.

Sehr geehrte Kunden,  
sollte der von Ihnen erworbene Artikel einmal nicht richtig funktionieren, senden Sie ihn nicht gleich zurück. Eventuell kann Ihnen unsere Hotline unter 069/954061-24 weiterhelfen. Kann das Problem trotzdem nicht behoben werden, haben Sie innerhalb der BRD die Möglichkeit, Artikel mit einem Warenwert ab 40 €, innerhalb der Gewährleistungsbestimmungen kostenlos zur Prüfung abholen zu lassen. Wir benötigen hierzu ihre



Adresse.

Diese können Sie telefonisch unter der unten genannten Hotline-Nummer oder schriftlich per Email: [technik@hydas.de](mailto:technik@hydas.de) an uns mitteilen. Machen Sie die Rücklieferung bitte versandfertig und fügen Sie eine Kopie des Kaufbeleges sowie eine Mängelbeschreibung bei. Wir bitten um Verständnis, dass unfrei gesendete Pakete leider nicht angenommen werden können.

Ihre Hydas – Kundenbetreuung

**Adresse für Gewährleistung und Service:**  
Hydas GmbH • Am Hohlen Weg 37 • D-34369 Hofgeismar  
Tel.: +49 69 - 95 40 61 13 • Fax: +49 69 - 95 40 61 40  
e-Mail: [info@hydas.de](mailto:info@hydas.de) • <http://www.hydas.de>

## Introduction

### Theory of therapy

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) is a non-invasive technique in which a low-voltage electrical current is delivered through wires from a small power unit to electrodes located on the skin. Electrodes are temporarily attached with paste in various patterns, depending on the specific condition and treatment goals. TENS is often used to treat pain, as an alternative or addition to pain medications. Therapy sessions may last from minutes to hours. The use of electrical stimulus for pain relief was popularized in the 19th century and became widespread in the 1960s and 1970s using battery power.

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) was first introduced into current clinical practice following Melzack and Wall's gate control theory of pain in 1965. Davis (1993) and Lewith (1984) explain the gate control theory of pain as follows. An area of the dorsal horn of the spinal cord, known as the substantia gelatinosa, acts as a gate to nociceptive impulses. It receives myelinated nerve fibres, the largest being A fibres, and small non-myelinated nerve fibres (C fibres). If pain impulses pass along fine myelinated fibres and C fibres rather than along A fibres, the gate is opened, and the patient perceives pain. If A fibre transmission of impulses is greater, the gate may be closed.

There is also evidence that the TENS machine enhances the production of the body's own natural pain killing substances: endorphins and enkephalins. Human body produces endorphins and enkephalins, which are opiate-like substances to counter the pain. Low frequency stimulation causes the release of the endorphins and enkephalins.

### Why consider digital pain relief?



Pain is a warning signal -we need these signals to tell us that something may be wrong with our body. Without it, we may do not know that part of our body might be damaged, thereby damaging them further. However, once we have identified damage, pain serves little purpose. In the case of chronic, regular pain it can significantly interfere with daily activities and the quality of life.


## How does the Digital Pain Relief (TENS) work??

Digital Pain Relief (TENS) works by passing harmless electrical signals into the body from its pads. This relieves pain in two ways:

- Firstly, it blocks the body's pain signals. These are normally transmitted from the area of damage through the nerve fibers to the brain, TENS interrupts these pain signals.
- Secondly, TENS stimulates the body's production of endorphins - its own natural painkillers.

## Contents and display indicators

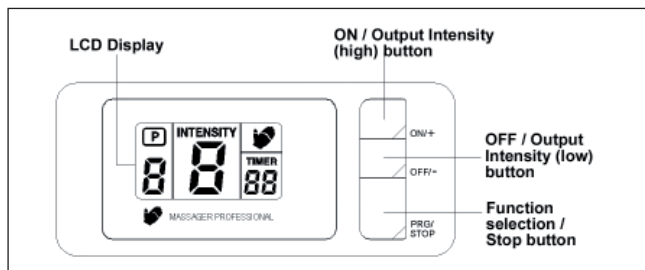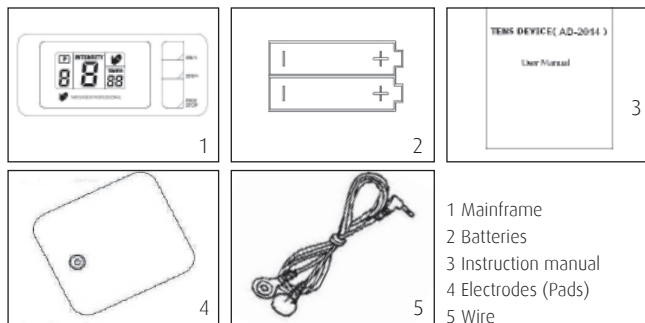

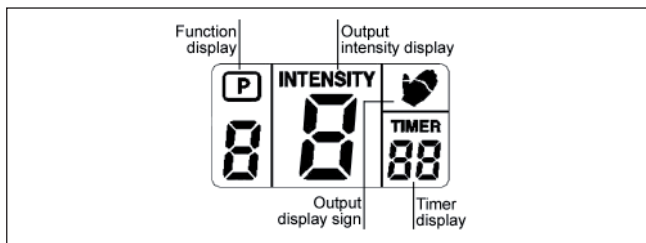

## Intended use

AD-2014 is a TENS device which is effective in relieving pain.

### Treatment effect:

- Relieving lower-back pain
- Stimulate muscles
- Promoting blood circulation
- Eliminate tiredness

## Contraindication

The device is safe for most all people, with the following exceptions:

- People with acute disease
- Cancer patients
- People with infectious skin wounds
- Women who are menstrating or expectant mothers
- People with heart disease
- People with high fever
- People with abnormal blood pressure
- People who have no feeling about their skins or people with abnormal skins
- People receiving physiotherapy or with unusual sensations of their body other than noted above.

## Product description

The AD-2014 is a battery operated pulse generator that sends electrical

impulses through electrodes to the body and reaches the underlying nerves and muscle groups. The device is provided with one controllable output channel. An electrode pair can be connected to the output channel. The electronics of the AD-2014 Digital create electrical impulses whose Intensity, Pulse Width, Pulse Rate may be altered according to the program. Press buttons are very easy to use and the panel cover prevents changes in the setting.

The AD-2014 corresponds to the below standards:

- EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995(Medical electrical equipment-Part1: General requirements for safety)
- EN 60601-1-2:2001 +A1 : 2006(Medical electrical equipment-Part1-2: General requirements for safety; Collateral Standard-Electromagnetic compatibility-Requirements and tests).

## Specifications

Product name:	TENS Device
Model:	AD-2014
Number of treatment program:	9
Range of pulse frequency:	2 - 50Hz
Range of output voltage:	40V $\pm$ 20%(500 Ohm load)
Classification:	Internally powered, Type BF applied part, IPX0, No AP or APG, Continuous operation
Machine size:	Approx. 120mmx62mmx19mm
Weight:	Approx. 57,6g (excl. battery)
Power source: batteries:	2 x 1.5V SIZE AAA
<b>Environmental temperature</b>	
- for operation:	5°C - 40°C
- for storage and transport:	-20°C - 55°C
<b>Environmental humidity</b>	
- for operation:	<80%
- for storage and transport:	<95%
<b>Environmental pressure:</b>	
Battery life:	80KPa-105KPa Approx. 2 months with alkaline batteries and 30 min. usage per day.

## Therapy mode

Mode	Parameters	Function
1	f=2Hz, pw=220μs, continuous outputting.	Tapping
2	f=10Hz, pw=180μs, continuous outputting.	Vibrate (slow)
3	f=25Hz, pw=145μs, continuous outputting.	Vibrate (fast)
4	f=50Hz, pw=120μs, intermittent outputting.	Massage
5	f=80Hz, pw=85μs, intermittent outputting.	Massage
6	f=100Hz, pw=70μs, continuous outputting.	Knead
7	f=120Hz, pw=55μs, intermittent outputting.	Massage
8	f=150Hz, pw=35μs, intermittent outputting.	Massage
9	Combined by press& knead & vibrate & thump	Auto



### Notice

- If you feel uncomfortable or abnormal skin sensations, please stop using. Consult with doctors and follow doctor's advice.
- Before you are to shift the electrode pad to a different position in using the apparatus, you must turn off the power first.
- Please don't use it in the bathroom or other place with high humidity.
- Please don't use it when driving or sleeping.
- Do not make any sharp kinks in the connecting leads or electrodes.
- Please don't use it for purposes other than outlined in this manual.
- In the process of stimulating and therapy, please do not allow metal parts of belts, wristwatches or necklaces touch the leaf electrode pads.
- Do not use the device if you are connected to, or in the vicinity of, high-frequency surgical or industrial equipment. This may cause burn injuries on the skin under the electrodes, as well as problems with the stimulator.
- Observe caution when using the device in the immediate vicinity of cellular phones that are switched on.
- Do not use the device in the direct vicinity of short-wave or microwave equipment, since this may affect the output power of the stimulator.
- This TENS Device is designed for adults and should never be used on infants or young children. Consult your physician or other health care professionals before use on older children.
- The device might not meet its performance specifications or cause safety hazard if stored or used outside the specified temperature and humidity ranges in this manual.

- Please do not place pads near heart, genitals or diseased skin.
- Users with implanted electronic equipment, such as pacemakers and intracardiac defibrillators who have not gotten doctor's permission must not use the device. Pregnant women should not use the device during the first trimester, and should always consult a doctor, midwife or physiotherapist prior to use.
- Simultaneous connection of a PATIENT to a h.f. surgical EQUIPMENT may result in burns at the site of the STIMULATOR electrodes and possible damage to the STIMULATOR.
- Operation in close proximity (e.g. 1 m) to a shortwave or microwave therapy EQUIPMENT may produce instability in the STIMULATOR output.
- Application of electrodes near the thorax may increase the risk of cardiac fibrillation.
- Please do not drop, repair, or rebuild it privately.
- Please do not use electrode pads other than those supplied by the manufacturer, otherwise it may bring biocompatible hazard and may result in errors.
- Please do not share the electrode pads with infective persons to avoid cross-infection.

## Setup and operating procedures

### 1. Battery loading

- a Open battery cover at the back of the device.
- b Load two „AAA“ size batteries. Please pay attention to polarity.
- c Close the battery cover.



- Rechargeable batteries are not suitable for this device.
- Remove the batteries if the monitor will not be used for a month or more to avoid relevant damage of battery leakage.
- Please do not mix use new and old batteries or different type of batteries.
- Please do not throw battery into fire.

### Disposal of appliances and batteries

The device and the batteries, must be disposed of according to local regulations at the end of their usage.

## 2. Attachment of electrode lead wires

- a Insert the plug into the electrode socket on the main apparatus.
- b Connect the snap-fasteners at the other end of the wire to the electrode pads.
- c Place the electrode on your body as directed by your physician.



- Clean the wires by wiping with a damp cloth.
- Coating them lightly with talcum powder will reduce tangling and prolong life.

## 3. Operating instructions

- a Press the "ON/+" button, the device will be put on, the LCD light all display for 1 second, then the device goes into standby mode and waits for your settings.
- b First, ensure the time of therapy. Defaulted the time is 15 minutes and it is fixed and can not be set by user.
- c Second, select the mode of therapy by pressing the "PRG/STOP" button. 9 modes can be selected, increasing the number of mode by every pressing, and return to mode 1 from 9.
- d As followed, press the "ON/+" to increase the intensity or "OFF/-" button to decrease the intensity, then the device starts to treat. Note: different person need different intensity, so you must increase the intensity from 0 to 9 slowly and carefully, stop to increase when you feel comfortable.
- e In treating, the 'hand' sign in LCD flashes until the time of therapy is exhausted.
- f After treatment, the device will be shut off automatically


## Clean the electrodes

- You should hold the plug when pulling it out. Please do not pull the wire.
- Please use clear water to wash or use wet cloth (instead of facial tissue) to gently wipe up the electrodes when cleaning them. Do not use brush or fingernail to clean surface of the electrodes to avoid scratching them.



# 4. Usage diagrams

## Sticking Diagramm

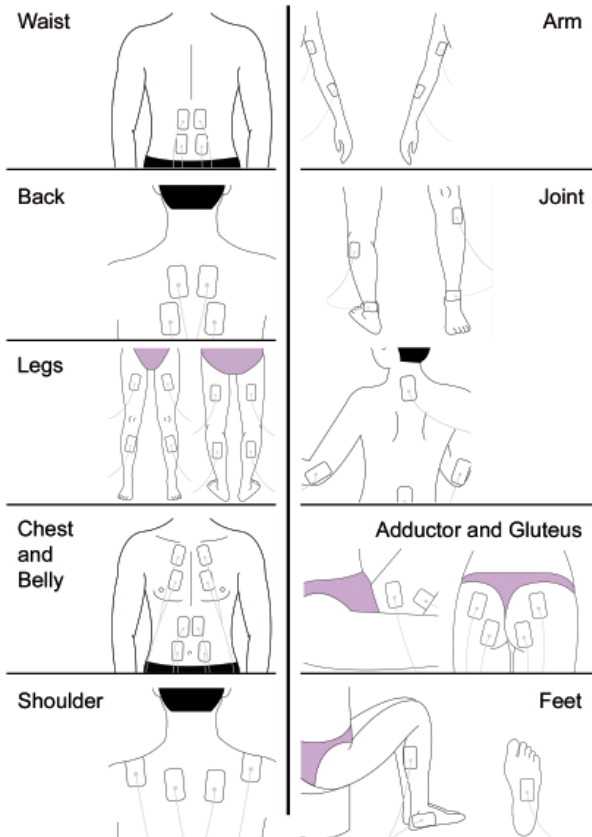

## Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
You have no feeling of stimulus.	Are the batteries exhausted?	Replace the batteries.
	Are the batteries properly loaded?	Correctly load the batteries.
	Is the wire properly connected?	Firmly connect the wire.
	Have you removed the transparent protection film over the electrode pad?	Remove the transparent protection film over the electrode pad.
Stimulus is weak.	Do the electrode pads firmly stick to the skin?	Firmly stick the electrode pad to the skin.
	Are the electrode pads overlapped?	Separate the electrode pad and stick them to the skin gain.
	Are the electrode pads dirty?	Please clean the electrode pad.
	Is intensity too weak?	Turn the intensity regulation dial to regulate it.
	Are the electrode pads properly positioned?	Change the position of the electrode pad.
The skin becomes red.	Is the therapeutic time too long?	Control it within 10-15 minutes a time.
	Do the electrode pads firmly stick to the skin?	Please firmly stick the electrode pad to the skin.
	Are the electrode pads too dry?	Please gently wipe them up with wet cloth and then use them again.

The skin becomes red.	Are the electrode pads dirty?	Please clean the electrode pad.
	Are the surface of the electrode pads scratched?	Please replace them with new electrode pad.
Power sources cut off in the therapeutic process.	Have the electrode pads come off the skin?	Turn off the power and stick the electrode pad firmly to the skin.
	Are the wires disconnected?	Turn off the power and properly connect the wire.
	Have the batteries been exhausted?	Please replace them with new ones.

## Maintenance

- Do not drop this device subject it to strong impact.
- Avoid high temperature and direct sunlight. Do not immerse the device in water.
- If this device is stored near freezing, allow it to acclimate to room temperature before use.
- Do not attempt to disassemble this device.
- If you do not use the device for a long time, please remove the batteries.
- If the device becomes dirty, please clean it with a soft dry cloth. Do not use any abrasive or volatile cleaners.
- No component can be maintained by user in the device. The circuit diagrams, component part lists, descriptions, or other information which will assist the user's appropriately qualified technical personnel to repair those parts of equipment which are designated as repairable can be supplied by the manufacturer.
- In order to ensure that the electrodes adhere as long as possible, they should be cleaned carefully with a damp, lint-free cloth.
- After use, stick the electrodes onto the backing film.
- Electrode Pads are designed to be replaceable, so when the electrodes do not adhere firmly, you must replace electrode-pads.



## Explanation of symbols on unit



Symbol for „CONSULT Operation Guide“.



Symbol for „TYPE BF APPLIED PARTS“.



Environment Protection — Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer for recycling advice.



Symbol for „MANUFACTURER“



0483 Complies with MDD93/42/EEC requirements

ENGLISH

## Warrenty information

The guarantee period is 24 months from the date of purchase and covers all manufacturers' errors in material and quality. This guarantee only applies if the instructions for use have been followed and becomes ineffective if force has been applied to the appliance or it has been used in any but the correct and proper manner, or if it has been serviced by any unauthorised person.

### Address for guarantee claims and service:

Hydas GmbH • Am Hohlen Weg 37 • 34369 Hofgeismar/Germany

Tel.: +49 69 - 95 40 61 13 • Fax: +49 69 - 95 40 61 40

e-Mail: [info@hydas.de](mailto:info@hydas.de) • <http://www.hydas.de>



## Entrée en matière TENS

### La théorie du traitement

Stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) est une technique non invasive qui permet de transférer le courant électrique à partir d'un dispositif de stimulation électrique par des fils de petit calibre aux électrodes placées sur la peau. Les électrodes auto-adhésives peuvent être appliquées dans différentes variations en fonction des exigences spécifiques ou des objectifs de traitement. TENS est souvent utilisé comme une alternative ou un complément à un traitement conventionnel de la douleur. Les traitements peuvent être appliqués pour plusieurs minutes ou plusieurs heures. L'application de la stimulation électrique pour soulager la douleur est connue depuis le 19ème siècle et était généralisée dans les années 1960 et 1970 avec l'utilisation d'appareils alimentés par des piles.

Stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) a été introduite en 1965, elle était initialement prévue dans les limites théoriques de contrôle ou en anglais «théorie du passage contrôlé» par Melzack et Wall dans : le but de soulager la douleur de façon clinique. Davis (1993) et Lewith (1984) expliquaient la théorie dans les limites de contrôle de la façon suivante : un domaine de la corne dorsale (en latin: dorsale Cornu) dans la moelle épinière, connu sous le nom «substance gélatineuse» sert de «passerelle» pour les impulsions sur les récepteurs de la douleur. Il contient les fibres nerveuses très fines et tranchantes (fibres A), qui réagissent très vite à des stimuli puissants au même titre que les fibres nerveuses (fibres C) qui elles ne sont pas tranchantes. Si les impulsions de douleur passées à travers les fibres nerveuses myélinisées A et les fibres C, la «porte» est alors ouverte à la douleur et le patient la ressent. Lorsqu'il y a transmission par le biais d'une plus forte impulsion, le flux nerveux est recréé et la douleur s'en trouve amoindrie parfois même, voir inexistante.

Il est également démontré que la stimulation électrique favorise la production naturelle dans l'organisme des substances endorphines et de l'énképhaline antidouleur. Le corps humain produit des endorphines et les enképhalines à opiacés qui sont les substances qui contribuent au soulagement de la douleur. Une stimulation à basse fréquence libère dans le corps la création d'endorphines et des enképhalines.



## Pourquoi envisager de soulagement de la douleur de cette façon?

La douleur est un signal d'avertissement, Nous avons besoin de ce signal pour apprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre corps. Sans ce signal, nous ne pouvions pas savoir qu'il y a peut être une infection dans notre corps ou qu'un organe quelconque subit un dysfonctionnement. Avons-nous identifié une déficience, la douleur a-t-elle atteint son but ?. Dans le cas où la douleur devient chronique, celle-ci peut conduire à une altération significative des activités quotidiennes et de la qualité de vie.


## Comment fonctionne l'atténuation de la douleur de façon digitale (TENS) ?

Le soulagement de la douleur numérique (TENS) travaille à l'aide d'impulsions électriques inoffensives qui sont transmises à travers les électrodes sur le corps. Cela conduit à la réduction de la douleur de deux façons:


- tout d'abord, la transmission de la douleur signalée par le corps et envoyée directement au cerveau par les fibres des nerfs est complètement interrompue.
- Deuxièmement, TENS stimule la production d'analgésiques naturels du corps, les endorphines.

FRANÇAISE


## Contenu et affichage

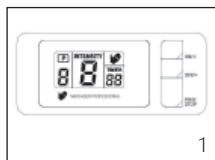


1

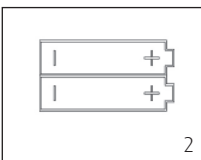

2

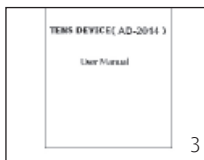

3

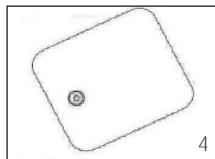



4



5

- 1 Appareil TENS
- 2 Piles
- 3 Mode d'emploi
- 4 Electrodes (Patches)
- 5 Câble de raccordement



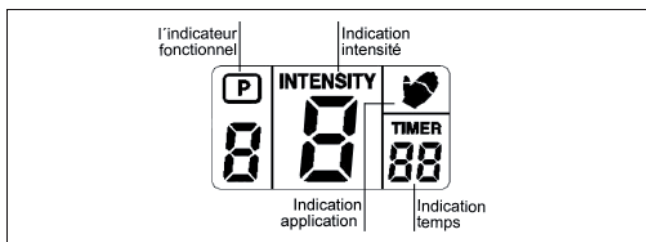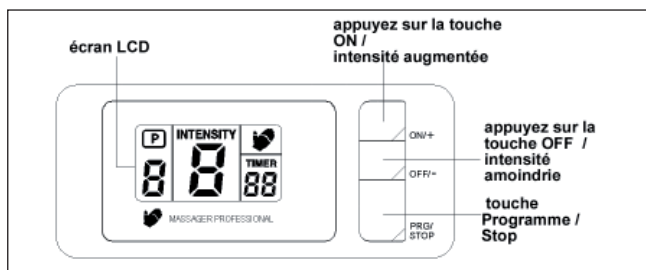

## Domaine d'utilisation

AD-2014 est un appareil TENS, qui peut être utilisé efficacement pour soulager la douleur.

### Traitements:

- Amoindrissement de la douleur au niveau des lombaires
- Stimulation musculaire
- Accélération de la circulation du sang
- Réduction de la fatigue

## Contre-indications

L'application de l'appareil est très sécurisée pour toutes personnes, à l'exception des personnes qui suivent une thérapie physique.

- personnes atteintes de maladies aiguës
- personnes ayant le cancer

- personnes ayant des plaies infectées
- personnes enceintes ou ayant leurs menstruations
- personnes malades du cœur
- personnes ayant de fortes températures, de fortes fièvres
- personne ayant une pression artérielle anormale
- Les personnes ayant la peau sensible ou irritée et ayant des problèmes cutanés
- Les personnes ayant une sensation anormale dans le corps à l'exception des cas mentionnés ci-dessus

## Désignation produit

L'AD-2014 est un générateur d'impulsions fonctionnant à partir de piles et il envoie dans le corps des impulsions électriques en utilisant des patchs-tampons et atteint ainsi les nerfs sous-jacents ou les groupes de muscles. Le dispositif est équipé de canaux réglables au niveau de l'intensité. Sur chaque canal, une paire d'électrodes est connectée.

L'électronique de l'AD-2014 génère des impulsions électriques qui changent d'intensité aussi bien au niveau de la largeur d'impulsion que de la fréquence d'impulsion en fonction du programme. Le fonctionnement des boutons de l'appareil est très simple et la plaque de recouvrement est prévue pour éviter des changements indésirables des paramètres.

L'AD-2014 est compatible avec les normes énumérées ci-dessous:

- EN 60601-1:1990 + A1: 1993 + A2: 1995 (Appareils électromédicaux - Partie 1: exigences générales pour la sécurité et performances essentielles)
- EN 60601-1-2:2001 + A1: 2006 (Partie 1-2: exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale: Compatibilité électromagnétique - Exigences et essais).

## Spécifications

Nom du produit:	TENS thérapie de la douleur
Modèle:	AD-2014 (article 4504)
Nombre de programmes de traitements:	9
Domaine de la fréquence des pulsions:	2.50 HZ
Tension de sortie:	40 V +/- 20% (charge de 500 ohm)



Classification:

Opéré à l'intérieur,  
B<sub>F</sub>, IPX0, aucune AP ou APG,  
l'application continue  
Env. 120 mm x 52 mm x 19 mm  
Env. 57,6 g (A l'exception des piles)  
2 piles de 1,5 V Type AAA

Dimension de l'appareil:

Poids:

Alimentation:

**Température ambiante:**

- lors de l'utilisation: de moins 5 C à + 40 C
- pour l'entreposage et le transport: -20 C à 55 C max

**Hydrométrie:**

- lors de l'utilisation: <80%
- lors du transport: <95%

**Pression de l'air ambiant:**

80KPa-105KPa  
environ 2 mois avec des piles  
alcalines ayant une utilisation  
moyenne de 30 minutes par jour.

Autonomie:

## Thérapie

Prog.	Paramètre	Fonction
1	Frequence= 2Hz, champ d'impulsion 220µs, constant	Tapotement (Tapping)
2	Frequence= 10Hz, champ d'impulsion 180µs, constant	Vibration (lent)
3	Frequence= 25Hz, champ d'impulsion 145µs, constant	Vibration (rapide)
4	Frequence= 50Hz, champ d'impulsion 120µs, palpitant	Massage
5	Frequence= 80Hz, champ d'impulsion 85µs, palpitant	Massage
6	Frequence= 100Hz, champ d'impulsion 70µs, constant	Malaxer
7	Frequence= 120Hz, champ d'impulsion 55µs, palpitant	Massage
8	Frequence= 150Hz, champ d'impulsion 35µs, palpitant	Massage
9	Combinaison Presser et malaxer	Automatique



## Attention

Arrêtez-l'application si vous vous sentez malade ou vous sentez des réactions anormales, par ex des réactions cutanées . Consultez si nécessaire un médecin et suivez les instructions du médecin.



- Avant de changer la position des plaquettes, soit des patcs, vous devez éteindre l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans la salle de bains ou autres pièces ayant une humidité élevée.
- Ne pas utiliser lorsque vous conduisez un véhicule et pendant votre sommeil.
- Câbles et blocs ne se plient pas avec force
- Ne pas utiliser pour des applications autres que celles citées.
- Lors de l'utilisation ne pas mettre les patchs en contact avec les parties métalliques de la ceinture, montre ou un collier.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes connecté à des dispositifs chirurgicaux à haute fréquence ou si dans le voisinage il y a de tels équipements à haute fréquence, voir des équipements industriels.
- Une attention particulière est recommandée lors de l'application s'il y a dans votre voisinage proche un téléphone cellulaire en fonctionnement.
- Ne pas utiliser à proximité de fours à micro-ondes à ondes courtes où la tension de sortie de l'unité TENS peut être modifiée.
- Cette unité TENS est conçue pour les adultes. Ne jamais utiliser avec des nourrissons ou enfants en bas âge. Pour l'utilisation des enfants plus âgés, il faut être conseillé par un kinésithérapeute ou un professionnel de la santé.
- L'unité ne peut pas exercer ses fonctions correctement ou peut causer un danger pour la sécurité si elle est entreposée à l'extérieur des paramètres de températures et des conditions d'humidité spécifiées ci dessus.
- Ne pas utiliser près du cœur, dans la région de l'aîne et ne pas l'appliquer sur la peau infectée.
- Les patients ayant une implantation de dispositifs électroniques tels que les stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs cardiaques ne peuvent pas utiliser l'appareil TENS sans recommandation de leur médecin. Les femmes enceintes ne devraient pas utiliser l'appareil TENS pendant le premier trimestre de la grossesse et seulement après consultation et accord de leur médecin, ou de la sage-femme habituelle ou du physiothérapeute.
- La connexion simultanée du patient avec un dispositif chirurgical à haute fréquence peut provoquer un court-circuit dans l'unité TENS et endommager l'appareil TENS.
- L'utilisation à proximité (par exemple 1m) d'une courte longueur d'onde





ou d' un four à micro-ondes peut provoquer des performances instables de l'unité TENS.

- L'application des électrodes près de la poitrine (ou du cœur) peut augmenter le risque de fibrillation auriculaire.
- Ne pas laissez tomber, ne pas réparer soi-même.
- Ne pas utiliser d'autres patchs d'autres producteurs. Cela peut conduire à des conditions biologiques altérées et conduire ainsi à des mauvaises impulsions .
- S'il vous plaît, ne prêtez pas vos électrodes à d'autres personnes pour éviter la transmission des éventuelles infections.



## Préparation et conseils d'utilisation

### 1. Mettre les piles

- Ouvrez le compartiment contenant les piles sur le dos de l'appareil.
- Insérez les deux piles de type „AAA”. Prêtez attention à la polarité en les plaçant dans le boîtier.
- Fermez le compartiment à piles.



- Les piles rechargeables ne sont pas adaptées pour cet appareil.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un mois , veuillez retirer les piles pour éviter les fuites et l'oxydation
- S'il vous plaît ne pas utiliser de piles anciennes et ne les mélanger pas avec des nouvelles
- Ne pas jeter les piles dans le feu.



### Mise au rebut des appareils usagés et des piles

Appareil et les piles doivent être recyclés à la fin de leur vie conformément aux réglementations locales.

### 2. Raccordement du câble aux électrodes

- Branchez le câble au connecteur sur la fiche d'appareil AD-2014. Maintenez la partie isolée de la tête, et appuyez sur la prise.
- L' encliquetage sur l'autre extrémité du câble permet de relier les patchs. Connecter et déconnecter Soigneusement en appuyant sur le bouton.
- Mettez les électrodes sur le corps tel que recommandé par le physiothérapeute ou comme indiqué dans les exemples.





- Nettoyez le cordon avec un chiffon humide.
- L'utilisation occasionnelle de talc prolonge la durée de vie du câble.

### 3. Mode d'emploi

- Pour mettre en marche appuyer sur le bouton "Onr / +" . L'affichage de l'écran LCD s'allume pendant une seconde, puis l'appareil passe en „mode veille et attend d'autres paramètres.
- Premièrement, prêtez attention au temps d'utilisation. La valeur par défaut est fixée à 15 minutes et ne peut pas être changée par l'utilisateur.
- Deuxièmement, choisissez le programme d'application en utilisant la touche / PRG / STOP „. 9 programmes peuvent être sélectionnés. Les numéros de programme augmentent chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Une fois que le programme a atteint le chiffre 9, il revient au point de départ et affiche 1
- Ensuite, augmentez l'intensité en appuyant sur le bouton „ON / + „. Le dispositif démarre l'application. Remarque: Chaque personne tolère des intensités différentes, c'est pour cela qu'il faut augmenter l'intensité lentement et avec précaution. Si les impulsions sont agréables, ne pas augmenter.
- Pendant l'utilisation l'icône clignote sur l'écran jusqu'à ce que l'application soit terminée.
- À la fin de la période d'application, l'appareil s'éteint automatiquement.

### Nettoyez les patches Électrodes


- Lorsque vous retirez le câble , veuillez le tenir mais ne pas tirez brutalement sur le cordon.
- Pour le lavage des électrodes (tampons) utilisez uniquement de l'eau et essuyez délicatement les électrodes (tampons) avec un chiffon humide non pelucheux. N'utilisez aucune brosse ou vos ongles pour éviter d'endommager la surface de l'électrode.



#### 4. Présentation des utilisations

##### Schéma de liaison

Taille

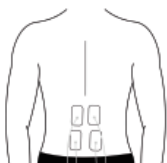

Bras



Dos




Articulations




Jambes



Poitrine  
et ventre

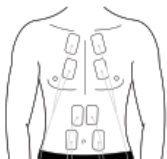

Adducteurs et fesses

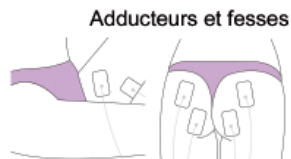

Épaules



Pieds



FRANÇAISE



## Problème à écarter

Problème	Cause possible	Aide possible
Les impulsions de stimulation sont brusquement interrompues ou très faibles.	Les piles sont épuisées?	changer les piles
	Les piles sont insérées correctement?	Les piles doivent être correctement insérées, comme indiqué dans le compartiment à piles.
	Est-ce que le câble est correctement branché?	Branchez le câble correctement.
	Est-ce le film protecteur transparent a été enlevé au niveau des électrodes ?	Le film de protection des électrodes (patches) doit être retiré pour une parfaite conduction.
Les impulsions de stimulation sont très faibles.	Est ce que les électrodes (tampons) adhèrent bien à la peau?	Bien coller les électrodes (tampons) sur la peau
	Est ce que les électrodes (plots) sont l'une sur l'autre?	Enlevez les électrodes (tampons), et ré-coller les correctement éloignées les unes des autres sur la peau.
	Sont elles sales?	Les électrodes (tampons) doivent être nettoyées avant toute nouvelle utilisation.
	Est ce que le réglage de l'intensité est trop faible?	Veuillez régler l'intensité en utilisant la molette d'intensité pour régler le canal.
	sont elles positionnées correctement?	Changez la position des électrodes
La peau rougit.	Si le temps d'application est trop long?	Contrôlez Régulièrement tous les 10 - 15 minutes.

La peau rougit.	Est ce que les électrodes (tampons) sont sèches?	Enlevez les électrodes (tampons) et nettoyez les, avant la réutilisation, avec un chiffon humide.
	sont elles sales?	Nettoyez les Électrodes (tampons)
	Adhèrent elles bien à la peau, les électrodes (tampons)?	Bien collez les électrodes (tampons) sur la peau.
	Est ce que la surface des électrodes (tampons) est cassée, ou endommagée?	Remplacez les par de nouvelles électrodes.
Les impulsions de stimulation sont brusquement interrompues.	Est ce que les électrodes se sont détachées de la peau?	Arrêtez l'appareil, et re-collez les électrodes sur la peau.
	Est ce que les câbles se sont détachés?	Arrêtez l'appareil, et reliez les câbles
	Les piles sont épuisées?	Remplacez les piles par des neuves.

## Entretien

- Ne pas laisser tomber l'appareil et ne pas le soumettre à des chocs violents.
- Évitez les températures élevées et la lumière et chaleur du soleil directement sur l'appareil. Ne pas le plonger dans l'eau car cela peut endommager le matériel.
- Si l'appareil a été stocké dans des zones très froides, veuillez placer l'appareil avant de l'utiliser dans un premier temps à température ambiante.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps, veuillez enlever les piles.
- Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. Pas de nettoyeurs abrasifs

- Les composants de l'appareil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. On peut mettre à disposition au personnel qualifié la représentation des circuits, la liste des pièces ou des descriptions voir même d'autres informations qui sont nécessaires à la réparation
- Pour obtenir une bonne force d'adhérence des patches aussi longtemps que possible, nettoyez les électrodes avec un chiffon humide, non pelucheux et sans poussière.
- Après l'utilisation des électrodes, veuillez remettre leurs films de protection.
- Les électrodes sont des consommables. Lorsque les électrodes perdent leur pouvoir d'adhérence, il faut les remplacer.

## Explications des symboles sur l'appareil



Icone pour le lien pour lire les instructions.



Symbole pour „TYPE BF“ équipement classifié.



Protection de l'environnement : les Déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. S'il vous plaît recycler comme indiqué par le organismes. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou le détaillant qui vous donnera des conseils pour le recyclage.



Symbole pour le fabricant



Conformément à la directive 93/42/CEE

## Garantie

La garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat et couvre les défauts de fabrication de matériaux et de la qualité. La facture sert comme preuve d'achat. Cette garantie n'est valable que si les instructions du mode d'emploi sont suivies. Les dommages dus à l'utilisation avec force, ou avec abus ou l'usage du produit par des personnes non autorisées annulent la garantie.



Chers clients, chères clientes,

Si toutefois le produit que vous venez d'acheter ne fonctionne pas de suite correctement, ne le renvoyez pas immédiatement. Peut-être que vous pouvez vous renseigner auprès de notre hotline 0(+49) 9/954061-24. Si le problème persiste, et que vous habitez en Allemagne, nous pouvons procéder à un enlèvement gratuit du produit avec une valeur minimum d'achat de 40 € dans le but d'une vérification, ceci fait partie des dispositions de la garantie. Nous avons besoin de votre adresse à cet effet. Vous pouvez nous appeler au numéro de la hotline ou formuler votre demande par écrit, par e-mail: [technik@hydass.de](mailto:technik@hydass.de). Veuillez joindre SVP une copie de la facture d'achat et une description de la défectuosité. Les colis envoyés sans affranchissement ne peuvent malheureusement pas être acceptés.

Votre service clientèle Hydass

Adresse pour la garantie et le Service Après-vente:  
Hydass GmbH • Am Hohlen Weg 37 • D-34369 Hofgeismar  
Tel.: +49 69 - 95 40 61 13 • Fax: +49 69 - 95 40 61 40  
e-Mail: [info@hydass.de](mailto:info@hydass.de) • <http://www.hydass.de>

## Inleiding TENS

### De theorie van de behandeling

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) is een niet-invasieve techniek, waarbij elektrische stroom van een prikkelstroomapparaat via kleine snoertjes naar de op de huid geplaatste elektroden worden overgebracht. De zelfklevende elektroden kunnen al naar gelang de specifieke eisen of behandelingsdoeleinden in verschillende variaties worden aangelegd. TENS wordt vaak als alternatief of als aanvulling op gebruikelijke pijnbehandeling toegepast. De behandelingen kunnen van een paar minuten tot meerdere uren plaatsvinden. Het gebruik van elektrische stimulatie ter verzachting van pijn is sinds de 19e eeuw bekend en werd in de 1960er en 1970er jaren met het gebruik van apparaten op batterijen verder verbreid.

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) werd vanaf 1965 eerst in overeenstemming met de poorttheorie of op z'n Engels „Gate Control Theory“ volgens Melzack en Wall bij klinische behandelingen voor pijnverzachting ingevoerd. Davis (1993) en Lewith (1984) verklaarden de poorttheorie als volgt. Een gebied van de achterhoorn (Latijn: cornu dorsale) in het ruggenmerg, bekend als „substantia gelatinosa“ dient als „poort“ voor impulsen op de pijnreceptoren. Hij bevat fijnmergsgedehoudende zenuwvezels (A vezels), mergsgedehoudende A vezels die reageren op sterke prikkels en niet-mergsgedehoudende zenuwvezels (C vezels). Als pijnimpulsen fijnmerghoudende A vezels en de C vezels passeren zonder impuls van de mergsgedehoudende A vezels, is de „poort open“, de patiënt voelt pijn. Bij overdracht van een sterkere impuls door de mergsgedehoudende A vezels kan de „poort“ worden gesloten.

Eveneens is aangetoond, dat prikkelstroom de aanmaak van de lichaamseigen natuurlijke pijnstillende substanties endorfine en encefaline stimuleert. Het menselijke lichaam maakt endorfine en encefaline aan als opiumachtige substantie ter bestrijding van pijn. Een laagfrequente stimulatie maakt endorfine en encefaline in het lichaam vrij.



## Waarom digitale bevrijding van pijn in overweging nemen?

Pijn is een waarschuwingssignaal - wij hebben dit signaal nodig om te vernemen, dat in ons lichaam iets niet in orde is. Zonder dit signaal zouden wij niet kunnen weten, dat in ons lichaam iets schade kan hebben opgelopen of verder wordt geschaad. Als wij een schade hebben geïdentificeerd, heeft de pijn zijn doel bereikt. In het geval dat pijnen chronisch worden, kan dit leiden tot significante belemmeringen in de dagelijkse activiteiten en de levenskwaliteit.


## Hoe werkt de digitale pijnbestrijding (TENS)?



De digitale pijnbestrijding (TENS) werkt met onschuldige elektrische impulsen, die via de pads op het lichaam worden overgedragen. Dit leidt tot pijnreductie langs twee wegen:

- Ten eerste wordt het doorsturen van de pijnsignalen van het lichaam, die normaliter vanaf het pijncentrum via de zenuwvezels naar de hersens worden doorgestuurd, door TENS onderbroken.
- Ten tweede stimuleert TENS de aanmaak van de lichaamseigen natuurlijke pijnkiller, de endorfine.



## Inhoud en meldingen op het display

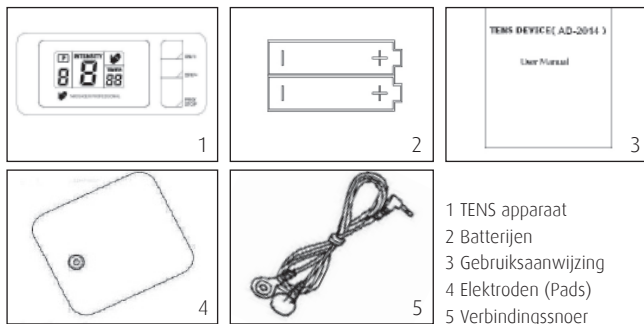

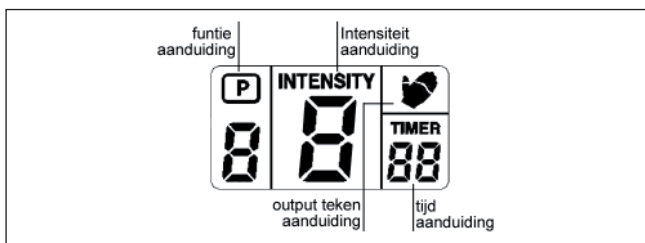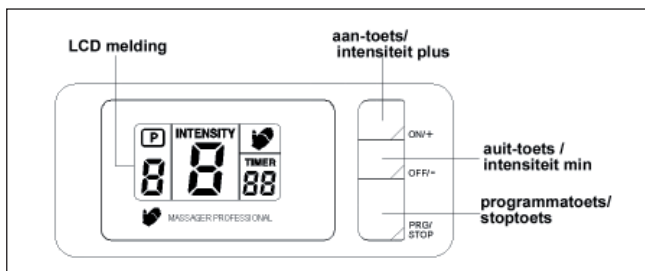

## Gebruik volgens de bestemming

AD-2014 is een TENS apparaat, dat effectief kan worden gebruikt voor de verzachting van pijn.

### Behandelingen:

- Verzachting van pijn in het achterste gedeelte van de lendenen
- Spierstimulatie
- Bevordering van de bloedcirculatie
- Vermindering van vermoeidheidsverschijnselen

## Contra-indicaties

Het gebruik van het apparaat is veilig voor alle personen, met de volgende uitzonderingen en tevens bij personen, die onder fysiotherapeutische behandeling zijn.

- Personen met acute aandoeningen



- Kankerpatiënten
- Personen met besmettelijke huidwonden
- Personen in de menstruatieperiode of in de zwangerschap
- Personen met hartaandoeningen
- Personen met hoge koorts
- Personen met abnormale bloeddruk
- Personen met verminderde gevoeligheid van de huid en met abnormale huid
- Personen met abnormale gevoeligheid van het lichaam behalve de reeds genoemde gevallen

## Productbeschrijving

De AD-2014 is een op batterijen werkende impulsgenerator, die via de pads elektrische impulsen naar het lichaam zendt en de daaronder liggende zenuwen of spiergroepen bereikt. Het apparaat is met eee, in intensiteit te besturen kanalen, uitgerust. Op de kanaal kan een paar elektroden worden aangesloten.

De elektronica van de AD-2014 genereert elektrische impulsen, die in intensiteit, impulsbreedte en impulsfrequentie afhankelijk van het gekozen programma veranderen. Het bedienen van de knoppen op het apparaat is zeer eenvoudig en de met een afdekplaatje afgesloten knoppen voorkomen ongewilde veranderingen in de instellingen.

De AD-2014 voldoet aan de hieronder genoemde normen:

- EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995 (medische elektrische toestellen - deel 1: Algemene veiligheidseisen met inbegrip van de essentiële prestatiekenmerken)
- EN 60601-1-2:2001 +A1 : 2006 (deel 1-2: Algemene veiligheidseisen met inbegrip van de essentiële prestatiekenmerken – aanvullende norm: Elektromagnetische compatibiliteit - eisen en keuringen) .

## Specificaties

Productnaam:	TENS pijntherapie
Model:	AD-2014 (artikel 4504)
Aantal behandelprogramma's:	9
Bereik van de impulsfrequenties:	2 - 50Hz





Uitgangsspanning:	40V ± 20%(500 Ohm load)
Classificering:	intern gevoed, type BF ,IPX0, geen AP of APG, doorlopend gebruik
Maten van het apparaat:	ca.120mm x 52mm x 19mm
Gewicht:	ca. 57,6g (excl. batterij)
Stroomvoorziening:	batterijen: 2 x1.5V type AAA
<b>Omgevingstemperatuur:</b>	
- bij het gebruik:	5°C - 40°C
- voor opslag en transport:	-20 °C - 55 °C
<b>Omgevingsluchtvochtigheid:</b>	
- bij het gebruik:	<80%
- voor opslag en transport:	<95%
<b>Omgevingsluchtdruk:</b>	80KPa-105KPa
Levensduur batterijen:	ca.2 maanden met alkaline batterijen bij 30 min. gebruik per dag.



## Therapie

Prog.	Parameters				Functie
1	Frequentie=	2Hz.	impulsbreedte	220µs.	constant Kloppen (Tapping)
2	Frequentie=	10Hz.	impulsbreedte	180µs.	constant Vibratie (langzaam)
3	Frequentie=	25Hz.	impulsbreedte	145µs.	constant Vibratie (snel)
4	Frequentie=	50Hz.	impulsbreedte	120µs.	pulserend Massage
5	Frequentie=	80Hz.	impulsbreedte	85µs.	pulserend Massage
6	Frequentie=	100Hz.	impulsbreedte	70µs.	constant Kneden
7	Frequentie=	120Hz.	impulsbreedte	55µs.	pulserend Massage
8	Frequentie=	150Hz.	impulsbreedte	35µs.	pulserend Massage
9	Combinatie drukken en kneden				Automatisch

NEDERLANDS



### Pas Op

- Bij onwel zijn of abnormale huidreacties het gebruik stoppen. Een arts consulteren en de aanwijzingen van de arts opvolgen.
- Voor een verandering van de positie van de pads, tijdens het gebruik, moet het apparaat werden uitgeschakeld.





- Niet gebruiken in de badkamer of ander vertrekken met hoge luchtvochtigheid.
- Niet gebruiken tijdens het besturen van een voertuig en tijdens de slaap.
- Verbindingssnoeren en pads niet scherp knikken.
- Niet gebruiken voor andere toepassingen dan de genoemde.
- Tijdens het gebruik de pads niet met de metalen delen van broekriem, armbandhorloge of halskettingen in aanraking laten komen
- Het apparaat niet gebruiken als u op hoogfrequente operatieapparaten bent aangesloten of zich bevindt in de buurt van zulke apparaten of hoogfrequente industriële installaties.
- Bijzondere aandacht is geboden, als het gebruik plaatsvindt in de onmiddellijke nabijheid van een ingeschakelde mobiele telefoon.
- Apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van korte-golftoestellen of magnetrons gebruiken. De uitgangsspanning van het TENS apparaat kan daardoor worden beïnvloed.
- Dit TENS-apparaat is ontwikkeld voor volwassenen. Nooit gebruiken bij kleuters of jonge kinderen. Voor gebruik bij oudere kinderen de fysiotherapeut of andere gezondheidsexpert consulteren.
- Het apparaat kan zijn werking niet correct vervullen of kan risico's voor de veiligheid veroorzaken, als het buiten de voorgeschreven temperatuurs- en luchtvochtigheidscondities wordt opgeslagen.
- Niet bij het hart, in de schaamstreek en op huid met een aandoening gebruiken.
- Patiënten met geïmplanteerde elektronische apparaten, zoals pacemaker of hartdefibrillator mogen het TENS apparaat zonder aanwijzing van de arts niet gebruiken. Zwangeren moeten het TENS apparaat tijdens het eerste kwartaal van de zwangerschap niet gebruiken en daarna alleen na geregeld overleg met de arts, de vroedvrouw of de fysiotherapeut.
- Gelijktijdige aansluiting van de patiënt op een hoogfrequent operatie-apparaat kan leiden tot een kortsluiting in het TENS apparaat en het TENS apparaat beschadigen.
- Het gebruik in de buurt (b.v. 1m) van een korte-golfapparaat of magnetron kan leiden tot een instabiel functioneren van het TENS apparaat.
- Gebruik van de elektroden dicht bij de borstkas (op het hart) kan het risico van hartfibrillatie verhogen.
- Niet laten vallen, zelf repareren of eigenhandig ombouwen.
- Geen elektrische pads van andere producenten gebruiken. Dit kan leiden tot gewijzigde biologische condities en daarmee tot verkeerde impulsen.





- De elektroden niet met andere personen delen s.v.p., om de overdracht van infecties te voorkomen.

## Vorbereitung en aanwijzingen voor gebruik

### 1. Batterijen plaatsen

- Batterijenvak aan de achterkant van het apparaat openen.
- Twee batterijen type „AAA“ erin leggen. Op de polariteit in het batterijenvak letten s.v.p.
- Batterijenvak sluiten.



- Heroplaadbare batterijen zijn voor dit apparaat niet geschikt.
- Als het apparaat een maand of langer niet wordt gebruikt batterijen verwijderen om leeglopen van de batterijen te voorkomen.
- Geen oude en nieuwe of verschillende batterijen samen gebruiken s.v.p.
- Batterijen niet in het vuur gooien.

### Weggoeien van oude apparaten en batterijen

Apparaat en batterijen moeten aan het eind van hun gebruik volgens de plaatselijk geldende regels worden verwijderd

### 2. Aansluiting van de elektrodensnoeren

- De stekker van het snoer in de aansluiting op het apparaat AD-2014 steken. Het geïsoleerde deel van de stekker vasthouden en in de contactdoos drukken.
- De drukknoppen aan het andere eind van het snoer met de pads verbinden. Drukknoppen zorgvuldig aansluiten en losmaken. Trekken aan het snoer kan het snoer beschadigen.
- De elektroden op het lichaam plaatsen, zoals door de fysiotherapeut geadviseerd of zoals in de voorbeelden getoond.



- Snoer met een vochtig doekje reinigen.
- Nu en dan gebruiken van talkpoeder verlengt de levensduur van het snoer.





### 3. Bedieningshandleiding

- a Voor inschakelen op de knop „On/+ „ drukken. De melding op het LCD-display brandt een seconde lang, daarna springt het apparaat in de „stand-by modus en wacht op verdere instellingen.
- b Als eerste de gebruikstijd in acht nemen. De standaardinstelling is op 15 minuten vastgelegd en kan door de gebruiker niet worden gewijzigd.
- c Als tweede het gebruiksprogramma via de toets „PRG/STOP“ kiezen. Er kunnen 9 programma's worden gekozen. De programmanummers lopen op bij elke druk op de toets. Nadat programma 9 is bereikt, springt de melding weer op 1.
- d Daarna door te drukken op toets „ON/+“ de intensiteit verhogen. Het apparaat start de toepassing. Pas op: Iedereen verdraagt verschillende intensiteiten, daarom de intensiteit langzaam en voorzichtig opvoeren. Als de impulsen aangenaam zijn, niet meer opvoeren.
- e Tijdens het gebruik knippert het symbool met de hand in de melding, tot het gebruik is geëindigd.
- f Aan het einde van de gebruikstijd schakelt het apparaat automatisch uit.




#### Elektroden (Pads) schoon

- Bij het uittrekken de stekker vasthouden, niet aan het snoer trekken.
- Voor het afwassen van de elektroden (pads) schoon water of voor voorzichtig afwissen van de elektroden (pads) een vochtig niet pluizend doekje gebruiken. Geen borstel of vingernagels gebruiken, zodat het oppervlak van de elektrode niet beschadigd wordt.



### 4. Weergave van de toepassingen

#### plakdiagram

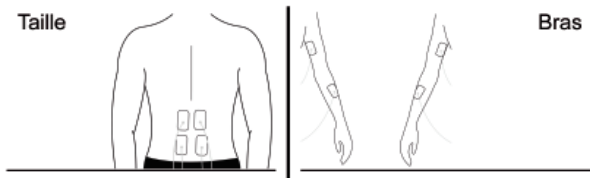


**Rug**



**Been**



**Borst en  
buik**

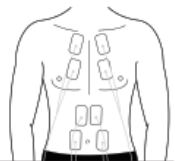

**Schouder**



**Gewrichten**



**Adductoren en zitvlak**



**Voet**





## Problemen verhelpen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	MOGELIJKE REMEDIE
De stimulatie-impulsen zijn niet waar te nemen.	Zijn de batterijen op?	Batterijen vervangen.
	Zijn de batterijen er goed ingelegd?	De batterijen volgens de markering in het batterijenvak leggen.
	Is het snoer goed aangesloten?	Het snoer goed aansluiten.
	Is de transparante beschermfilm van de elektroden (pads) verwijderd?	De beschermfilm van de elektroden (pads) verwijderen.
De stimulatie-impulsen zijn slechts zeer zwak.	Hechten de elektroden (pads) goed op de huid?	De elektroden (pads) goed op de huid plakken.
	Liggen de elektroden (pads) over elkaar heen?	De elektroden (pads) verwijderen en opnieuw op de huid plakken.
	Zijn de elektroden (pads) vuil?	De elektroden (pads) reinigen of nieuwe gebruiken.
	Is de instelling van de intensiteit te zwak?	De intensiteit met de intensiteitsregelaar van het kanaal regelen.
	Zijn de elektroden (pads) goed geplaatst?	De plaats van de elektroden (pads) veranderen.
De huid wordt rood.	Is de gebruikstijd te lang?	Geregeld om de 10 - 15 minuten controleren.
	Hechten de elektroden (pads) goed op de huid?	De elektroden (pads) goed op de huid bevestigen.
	Zijn de elektroden (pads) vuil?	Elektroden (pads) schoon



De huid wordt rood.	Zijn de elektroden (pads) te droog?	De elektroden (pads) met een vochtige doek afwissen en opnieuw gebruiken. Goed bevestigen.
	Is het oppervlak van de elektroden (pads) beschadigd of gebroken?	De elektroden (pads) vervangen door nieuwe.
De stimulatie-impulsen worden plotseling onderbroken.	Zijn de elektroden (pads) van de huid los geraakt?	Apparaat uitschakelen en de elektroden (pads) goed op de huid bevestigen.
	Zijn de snoeren losgeraakt?	Apparaat uitschakelen en de snoeren opnieuw verbinden.
	Zijn de batterijen op?	Batterijen vervangen door nieuwe.

## Onderhoud

- Het apparaat niet laten vallen of blootstellen aan sterke schokken.
- Hoge temperaturen en rechtstreekse zonnestraling vermijden. Niet in water dompelen, omdat het apparaat daardoor beschadigd wordt.
- Als het apparaat in een zeer koude omgeving opgeslagen is geweest, apparaat voor het gebruik eerst op kamertemperatuur laten komen.
- Niet proberen, het apparaat uit elkaar te halen
- Als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, de batterijen eruit halen.
- Voor het reinigen van het apparaat alleen een droge zachte doek gebruiken. Geen schurende en vluchtige reinigingsmiddelen gebruiken.
- De componenten in het apparaat kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. De weergave van de schakelcircuits, de lijst van onderdelen of andere beschrijvingen en informatie, die voor de reparatie door gekwalificeerd personeel nodig zijn, kunnen door ons ter beschikking worden gesteld.
- Om de kleefkracht van de pads zo lang mogelijk te bewaren, de pads met een vochtige, stof- en pluisvrije doek reinigen.
- Na het gebruik de elektroden (pads) weer op de beschermfolie plakken.

- De elektroden zijn aan slijtage onderhevige artikelen. Als de elektroden hun kleefkracht verliezen, moeten ze door nieuwe elektroden (pads) worden vervangen.

## Verklaring van de symbolen op het apparaat



Symbool voor de aansporing de gebruiksaanwijzing te lezen.



Symbool voor „TYPE BF „ geclassificeerde apparaten



Milieubescherming — Elektrische afvalproducten behoren niet te worden verwijderd samen met het huishoudelijk afval. Recycle s.v.p. waar er mogelijkheden toe bestaan. Vraag na bij uw plaatselijke milieudienst of detailhandelaar voor recycle-advies.



Symbool voor producent



0483 Voldoet aan de Richtlijn 93/42/EEC

## Garantie

De garantie bedraagt 24 maanden vanaf aankoopdatum op fabrieksfouten in materiaal en kwaliteit. Als bewijs dient de aankoopbon. Deze garantie is alleen geldig, als de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing in acht worden genomen. Bij schade door gebruik van geweld, verkeerd gebruik en ondeskundig gebruik of onderhoud door onbevoegden vervalt de garantie.

Geachte klanten,

Als het door u aangeschafte artikel een keer niet goed werkt, stuurt u het dan niet meteen retour. Eventueel kan onze hotline onder 069/954061-24 u verder helpen. Als het probleem desondanks niet verholpen kan worden, heeft u binnen de BRD de mogelijkheid, artikelen met een goederenwaarde vanaf € 40, binnen de garantiebepalingen kosteloos voor controle af te laten halen. Wij hebben hiervoor uw adres nodig.

Dat kunt u ons telefonisch onder het hieronder genoemde hotline-nummer of schriftelijk per e-mail: [technik@hydas.de](mailto:technik@hydas.de) meedelen. Maakt u de retourzending s.v.p. verzendklaar en voegt u er een kopie van de aankoopbon en een beschrijving van het mankement bij. Wij vragen om begrip voor het feit dat ongefrankeerd gestuurde pakketten helaas niet aangenomen kunnen worden.

Uw Hydas – Klantenservice

NEDERLANDS

**Adres voor garantie en service:**

Hydas GmbH • Am Hohlen Weg 37 • D-34369 Hofgeismar

Tel.: +49 69 - 95 40 61 13 • Fax: +49 69 - 95 40 61 40

e-Mail: [info@hydas.de](mailto:info@hydas.de) • <http://www.hydas.de>



## Introduzione TENS

### La teoria del trattamento

Stimolazione nervosa elettrica transcutanea (TENS) è una tecnica non invasiva, in cui della corrente elettrica viene trasmessa da un elettrostimolatore attraverso piccoli cavi fino a degli elettrodi fissati sulla pelle. Gli elettrodi autoadesivi possono essere applicati secondo le esigenze specifiche o gli scopi del trattamento in diverse variazioni. TENS viene impiegato spesso come alternativa o in aggiunta alla normale terapia antalgica. I trattamenti possono susseguirsi da pochi minuti a parecchie ore. L'applicazione di stimolazioni elettriche per il lenimento del dolore è noto sin dal XIX secolo ed è stato ulteriormente diffuso negli anni '60 e '70 con l'utilizzo di apparecchi alimentati a pile.

Stimolazione nervosa elettrica transcutanea (TENS) fu introdotta fin dal 1965, all'inizio conformemente alla teoria dei limiti di controllo o in inglese „Gate Control Theory“ a Melzack e Wall in trattamenti clinici per alleviare il dolore. Davis (1993) e Lewith (1984) spiegano la teoria dei limiti di controllo nel modo seguente. Una zona dei corni posteriori (latino: Cornu dorsale) nel midollo spinale, nota come „Substantia gelatinosa“ serve da „porta“ per impulsi sui recettori dolorifici. Essa contiene fibre mieliniche sottili (fibre A), fibre mieliniche A, che reagiscono a forti stimoli e fibre amieliniche (fibre C). Quando degli impulsi dolorifici attraversano le fibre mieliniche A e le fibre C senza impulso delle fibre mieliniche A, la „porta“ è aperta, il paziente sente dolore. Trasmettendo un impulso più forte attraverso le fibre mieliniche A la „porta“ può essere chiusa.

E' ugualmente dimostrato che la corrente impulsiva incrementa la produzione delle sostanze naturali analgesiche proprie del corpo, endorfina e encefalina. Il corpo umano produce endorfine ed encefaline come sostanze simili all'oppio per ridurre il dolore. Una stimolazione a bassa frequenza libera endorfina ed encefalina nel corpo.



## Perchè prendere in considerazione il trattamento digitale per la riduzione del dolore?


Il dolore è un segnale di avvertimento- noi abbiamo bisogno di questo segnale per sapere che nel nostro corpo c'è qualcosa che non va. Senza questo segnale non potremmo sapere che nel nostro corpo ci può essere qualcosa danneggiata o continua a essere danneggiata. Se abbiamo un danno, il dolore ha adempiuto al suo compito. Nel caso che i dolori diventino cronici, questo può condurre a danni significativi delle attività quotidiane e della qualità di vita.

## Come funziona il trattamento digitale per ridurre il dolore (TENS)?


Il trattamento digitale per ridurre il dolore (TENS) lavora con impulsi elettrici innocui che vengono trasmessi al corpo attraverso i pads. Questo porta per due vie alla riduzione del dolore:

- Anzitutto tramite TENS viene interrotta la trasmissione dei segnali di dolore del corpo, che normalmente vengono trasmessi dal centro del dolore al cervello attraverso le fibre nervose.
- Secondo, TENS stimola la produzione dei killer del dolore naturali propri del corpo, della endorfina.


## Contenuto e indicazioni sul display

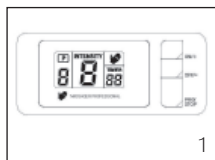


1

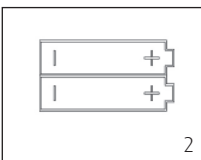


2

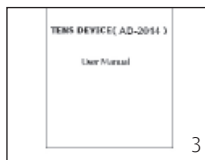

3

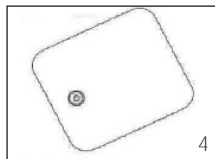

4

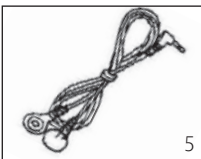


5

- 1 Apparecchio TENS
- 2 Pile
- 3 Istruzioni per l'uso
- 4 Elettrodi (pads)
- 5 cavo di collegamento

ITALIANO



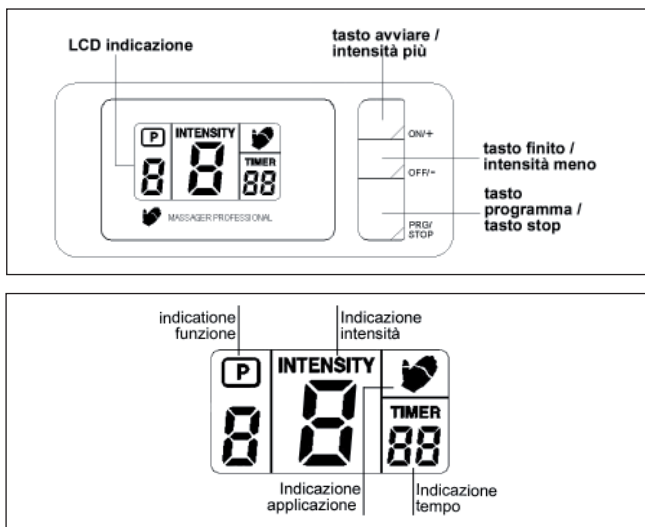

## Uso conforme allo scopo previsto

AD-2014 è un apparecchio TENS che può essere impiegato effettivamente per il lenimento del dolore.

### Trattamenti:

- Lenimento del dolore nella zona lombare posteriore
- Stimolazione muscolare
- Stimolazione della circolazione del sangue
- Riduzione di sintomi di stanchezza

## Controindicazioni

L'uso dell'apparecchio è sicuro per tutte le persone, con le seguenti eccezioni o che si sono sottoposti a trattamento fisioterapico.

- Persone con patologie acute
- Pazienti ammalati di cancro

- Persone con escoriazioni cutanee infettive
- Persone durante la mestruazione o la gravidanza
- Persone con malattie cardiache
- Persone con febbre alta
- Persone con ipertensione arteriosa anormale
- Persone con limitata sensibilità cutanea e pelle anormale
- Persone con percezione fisica anormale, oltre ai casi già nominati

## Descrizione del prodotto

L' AD-2021 è un generatore di impulsi a pile che invia al corpo impulsi elettrici attraverso i pads e raggiunge i nervi o i gruppi di muscoli che si trovano sotto. L'apparecchio è dotato di uno canal con intensità indipendentemente regolabili. Ad canale possono essere collegati un paio di elettrodi.

L'elettronica dell' AD-2021 produce impulsi elettrici che cambiano in dipendenza dell'intensità, ampiezza di impulso e frequenza di impulso del rispettivo programma. l'uso dei tasti sull'apparecchio è molto semplice e i tasti con placche di copertura chiudibili impediscono involontari cambiamenti delle impostazioni.

L' AD-2021 è conforme agli standard sottoelencati:

- EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995 (Apparecchi elettrici usati in medicina -Parte 1: Definizioni generali per la sicurezza incluse le caratteristiche sostanziali)
- EN 60601-1-2:2001 +A1 : 2006 (Parte 1-2: Definizioni generali per la sicurezza incluse le caratteristiche sostanziali - Norma supplementare: Tollerabilità elettromagnetica - esigenze e controlli) .

## Specificazioni

Nome prodotto:	Terapia del dolore TENS
Modello:	AD-2014 (Articolo 4504)
Numero programmi di trattamento:	9
Ampiezza delle frequenze d'impulso:	2 - 50Hz
Tensione d'uscita:	40V $\pm$ 20%(500 Ohm load)
Classificazione:	a funzionamento interno, tipo BF, IPX0, nessun AP o APG, uso continuo

Dimensioni dell'apparecchio:	circa 120mm x 52mm x 19mm
Peso:	circa 57,6g (pile escluse)
Alimentazione corrente:	pila: 2 x 1.5V tipo AAA
<b>Temperatura ambientale:</b>	
- durante l'uso:	5°C - 40°C
- per la conservazione e il trasporto:	-20 °C - 55 °C
<b>Umidità ambientale:</b>	
- durante l'uso:	<80%
- per la conservazione e il trasporto:	<95%
<b>Pressione ambientale:</b>	
	80KPa-105KPa
Durata delle pile:	circa 2 mesi con pile alcaline per un uso di 30 minuti giornalieri.

## Terapia

Prog.	Parametri	Funzione
1	Frequenza= 2Hz. ampiezza impulsi 220µs. costante	Battito
2	Frequenza= 10Hz. ampiezza impulsi 180µs. costante	Vibrazione (lenta)
3	Frequenza= 25Hz. ampiezza impulsi 145µs. costante	Vibrazione (veloce)
4	Frequenza= 50Hz. ampiezza impulsi 120µs. pulsante	Massaggio
5	Frequenza= 80Hz. ampiezza impulsi 85µs. pulsante	Massaggio
6	Frequenza= 100Hz. ampiezza impulsi 70µs. costante	Impastare
7	Frequenza= 120Hz. ampiezza impulsi 55µs. pulsante	Massaggio
8	Frequenza= 150Hz. ampiezza impulsi 35µs. pulsante	Massaggio
9	Combinazione pressare e impastare	Automatico



## Attenzione

Interrompere l'applicazione nel caso di malessere o reazioni cutanee

- anormali. Consultare un medico e seguire le sue istruzioni.
- Prima di cambiare la posizione dei pads durante l'applicazione, l'apparecchio deve essere spento.
- Non usare l'apparecchio in bagno o in altri luoghi con alta umidità.
- Non usare durante la guida di un veicolo o mentre si dorme.
- Non piegare forte il cavo di collegamento e i pads.
- Non utilizzare se non per le applicazioni consentite.



- Durante l'applicazione non mettere i pads in contatto con le parti metalliche di cinture, orologi o collane.
- Non usare l'apparecchio se si è collegati ad apparecchi chirurgici ad alta frequenza o si è nelle vicinanze di simili apparecchi o impianti commerciali ad alta frequenza.
- Si consiglia particolare attenzione se l'applicazione avviene nelle immediate vicinanze di un radiotelefono acceso.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di apparecchi a onde corte o a microonde. La tensione di uscita dell'apparecchio TENS ne può essere influenzata.
- Questo apparecchio TENS è stato concepito per adulti. Non usare con bambini o ragazzini. Per un'applicazione con ragazzi più grandi consultare il fisioterapista o altri esperti della salute.
- L'apparecchio non può adempiere correttamente alle sue funzioni o può creare rischi per la sicurezza se viene conservato al di fuori delle condizioni di temperatura e di umidità previste.
- Non usare al cuore, nelle zone intime e sulla pelle malata.
- Pazienti con apparecchi elettronici impiantati, come stimolatori cardiaci o defibrillatori cardiaci non devono usare l'apparecchio TENS senza il consiglio del medico. Gestanti non dovrebbero usare l'apparecchio TENS durante i primi tre mesi della gravidanza e dopo, solo dietro regolare intesa con il medico, l'ostetrica o il fisioterapista.
- Collegamento simultaneo del paziente con un apparecchio chirurgico ad alta frequenza può portare ad un corto circuito nell'apparecchio TENS e danneggiarlo.
- L'applicazione nelle vicinanze (p.es. 1 m) di un apparecchio ad onde corte o a microonde può causare una prestazione instabile dell'apparecchio TENS.
- Applicazione degli elettrodi in prossimità del torace (al cuore) può accrescere il rischio di fibrillazione cardiaca.
- Non lasciare cadere, riparare o trasformare di propria mano.
- Non utilizzare pads di altri produttori. Questo può condurre a mutate condizioni biologiche e così a falsi impulsi.
- Non condividere per favore i pads con altre persone, per evitare la trasmissione di infezioni.





## Preparazione e indicazioni per l'applicazione

### 1. Inserire le pile

- a Aprire lo scomparto pile sul lato posteriore dell'apparecchio.
- b Inserire due pile tipo „AAA“. Fare attenzione alla polarità.
- c Chiudere lo scomparto pile.



- Pile ricaricabili non sono indicate per questo apparecchio.
- Se l'apparecchio non viene usato per un mese o più, togliere le pile per evitare una fuoriuscita del liquido.
- Non mischiare pile vecchie e nuove o di diverso tipo.
- Non buttare le pile nel fuoco.

### Smaltimento dei vecchi apparecchi e delle batterie

Alla fine dell'uso apparecchio e pile devono essere smaltite secondo le regole locali.

### 2. Collegamento dei cavi degli elettrodi

- a Introdurre la spina del cavo nella connessione dell'apparecchio AD-2014. Tenere ferma la parte isolata della spina e premere sulla boccola di connessione.
- b Unire i pulsanti all'altra estremità del cavo con i pads. Collegare attentamente i pulsanti e separare. Tirare al cavo può danneggiarlo.
- c Applicare gli elettrodi sul corpo, come raccomandato dal fisioterapista o come illustrato negli esempi.



- Pulire il cavo con un panno umido
- L'uso occasionale di borotalco allunga la durata del cavo.

### 3. Istruzioni per l'uso

- a Per accendere premere il tasto „On/+ „. Il display LCD s'illumina per un secondo, poi l'apparecchio passa nel modo „Stand by“ e attende altre impostazioni.
- b Come prima cosa fare attenzione al tempo di applicazione. La prescrizione standard è fissata su 15 minuti e non può essere cambiata dall'utente.
- c Come seconda cosa scegliere il programma di applicazione con il tasto „/PRG/STOP“. Possono essere scelti 9 programmi. I numeri di programma aumentano ogni volta che si preme il tasto. Dopo che il programma 9 è stato raggiunto, l'indicazione passa di nuovo a 1.




- d In seguito aumentare l'intensità premendo il tasto „ON/+“.  
L'apparecchio fa partire l'applicazione. Attenzione: ogni persona sop-  
porta intensità differenti, pertanto aumentare lentamente e cautamente  
l'intensità. Non aumentare ancora di più se gli impulsi sono piacevoli.
- e Durante l'applicazione il simbolo con la mano lampeggia sul display fino  
a quando l'applicazione non è terminata.
- f Alla fine del tempo di applicazione l'apparecchio si spegne automatica-  
mente.


### Pulire gli elettrodi (pads)

- Tenere ferma la spina mentre la si estrae.
- Per lavare gli elettrodi (pads) utilizzare acqua pulita o per spolverare attentamente gli elettrodi (pads) un panno umido senza sfilaccature. Non utilizzare spazzole o le unghie delle dita, per non danneggiare la superficie degli elettrodi.

## 4. Rappresentazione delle applicazioni

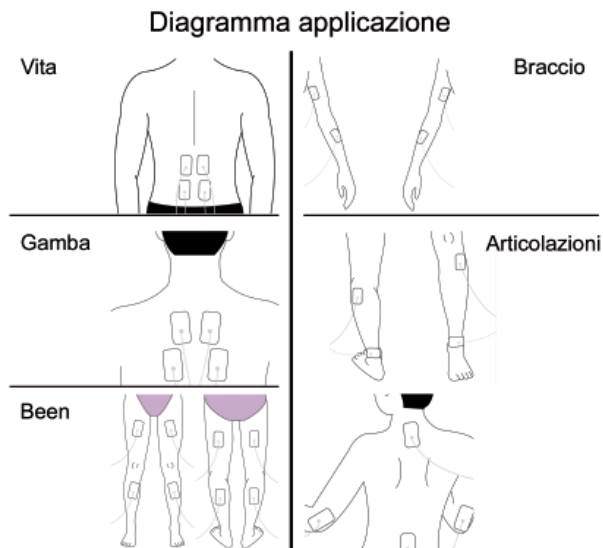

**Torace e  
ventre**

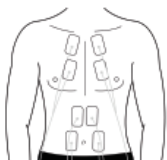

**adduttori e posteriore**



**Spalla**



**Piede**



## Problemi e la loro risoluzione

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILE RIMEDIO
Gli impulsi di stimolazione non sono percepiti.	Sono consumate le pile?	Sostituire le pile.
	Sono state inserite correttamente le pile?	Inserire le pile nello scomparto pile secondo il contrassegno.
	E' stato collegato correttamente il cavo?	Collegare il cavo in modo corretto.
Gli impulsi di stimolazione sono solo molto deboli.	E' stata tolta la pellicola di protezione trasparente dagli elettrodi (pads)?	Togliere la pellicola di protezione dagli elettrodi (pads).
	Aderiscono bene gli elettrodi (pads) sulla pelle?	Incollare bene gli elettrodi (piastrine) alla pelle.
	Si trovano gli elettrodi (pads) l'uno sull'altro?	Togliere gli elettrodi (pads) e incollarli di nuovo sulla pelle.
	Sono sporchi gli elettrodi (pads)?	Pulire gli elettrodi (pads) o usare dei nuovi.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILE RIMEDIO
Gli impulsi di stimolazione sono solo molto deboli.	E' troppo debole l'impostazione dell'intensità?	Regolare l'intensità nel regolatore d'intensità del canale.
	Sono posizionati correttamente gli elettrodi (pads)?	Cambiare la posizione degli elettrodi (pads).
La pelle si arrossa.	E' troppo lungo il tempo di applicazione?	Controllare regolarmente ogni 10 - 15 minuti.
	Sono troppo asciutti gli elettrodi (pads)?	Pulire gli elettrodi (pads) con un panno umido e usarli di nuovo. Fissare bene.
	Aderiscono bene gli elettrodi (pads) sulla pelle?	Fissare bene gli elettrodi (pads) sulla pelle.
	Sono sporchi gli elettrodi (pads)?	Pulire gli elettrodi (pads).
	E' danneggiata o rotta la superficie degli elettrodi (pads)?	Sostituire gli elettrodi (pads) con dei nuovi.
Gli impulsi di stimolazione vengono interrotti improvvisamente.	Si sono staccati gli elettrodi (pads) dalla pelle?	Spegnere l'apparecchio e fissare bene gli elettrodi (pads) sulla pelle.
	Si sono staccati i cavi?	Spegnere l'apparecchio e collegare di nuovo i cavi.
	Sono consumate le pile?	Sostituire le pile con delle nuove.

## Manutenzione

- Non lasciare cadere a terra l'apparecchio o esporlo a forti colpi.
- Evitare alte temperature e dirette irradiazioni solari. Non immergere in acqua poiché l'apparecchio ne viene danneggiato.





- Se l'apparecchio è stato conservato in luoghi molto freddi, riscaldarlo a temperatura ambiente prima dell'applicazione.
- Non cercare di smontare l'apparecchio.
- Togliere le pile se l'apparecchio non viene usato per lungo tempo.
- Usare un panno morbido e umido per pulire l'apparecchio. Non usare detersivi abrasivi e volatili.
- I componenti nell'apparecchio non possono essere manutenzionati dall'utente. Lo schema del circuito, la lista degli elementi o altre descrizioni e informazioni necessari per la riparazione da parte di personale specializzato possono essere messi a disposizione da noi.
- Per mantenere il più a lungo possibile la loro forza adesiva pulire i pads con un panno umido, senza polvere e sfilacciatore.
- Dopo l'applicazione incollare gli elettrodi (pads) di nuovo sul foglio di protezione.
- Gli elettrodi sono articoli soggetti ad usura. Se gli elettrodi perdono la forza adesiva, devono essere sostituiti da altri elettrodi (pads).

## Spiegazione dei simboli sull'apparecchio



Simbolo di rimando alla lettura delle istruzioni per l'uso.



Simbolo per apparecchi classificati „Tipo BF „.



Rifiuti prodotti da apparecchi elettrici non devono essere gettati nei normali rifiuti urbani ma smaltiti presso dei centri di raccolta. Rivolgersi all'amministrazione comunale per ottenere informazioni riguardo al centro di raccolta per lo smaltimento dei rifiuti.



Simbolo per il produttore



0483 Conforme alle norme 93/42 CEE

## Garanzia

La garanzia è di 24 mesi a partire dalla data di acquisto e copre i difetti di materiale e di qualità. Questa garanzia è valida unicamente in caso di osservazione delle istruzioni per l'uso. In caso di danni dovuti all'uso della



forza, abuso e utilizzazione non conforme o di manutenzione da parte di personale non autorizzato, non si applicano le condizioni di garanzia.

Carissimi clienti,  
se l'articolo da Voi acquistato non dovesse funzionare correttamente, non lo spedite subito indietro. Eventualmente il nostro servizio di supporto in linea 069 95 40 61 24 potrebbe aiutarVi. Se nonostante ciò il problema non può essere risolto, avete, all'interno della Germania, la possibilità di lasciar prelevare gratis, nell'ambito delle condizioni di garanzia, articoli con un valore che vanno da 40 € per un controllo. Per questo abbiamo bisogno del vostro indirizzo. Potete comunicarcelo numero telefonico sottocitato o per E-mail: [technik@hydas.de](mailto:technik@hydas.de). Tenete pronta per la spedizione la nuova consegna e aggiungete una copia dello scontrino nonché una descrizione del difetto. Vi preghiamo di comprendere che pacchetti spediti senza affrancatura non possono purtroppo essere accettati.

Il vostro servizio di assistenza ai clienti Hydas

ITALIANO

**Indirizzo per garanzia e manutenzione:**  
Hydas GmbH • Am Hohlen Weg 37 • D-34369 Hofgeismar  
Tel.: +49 69 - 95 40 61 13 • Fax: +49 69 - 95 40 61 40  
e-Mail: [info@hydas.de](mailto:info@hydas.de) • <http://www.hydas.de>

## Introducción TENS

### La teoría del tratamiento

La estimulación eléctrica transcutánea nerviosa (TENS) es una técnica no invasiva, en la cuál la corriente eléctrica de un aparato de electroimpulsos se transmite a través de cables pequeños a electrodos colocados en la piel. Los electrodos autoadhesivos se pueden colocar dependiendo de las necesidades especiales o finalidades del tratamiento en diferentes variaciones. En muchos casos se aplica TENS como alternativa o apoyo al tratamiento habitual de dolor. Los tratamientos pueden variar de algunos minutos a varias horas. La aplicación de corriente eléctrica para el alivio de dolor se dio a conocer en el siglo diecinueve y se expandió su uso en los años 1960 y 1970 con aparatos alimentados por pilas.

La estimulación eléctrica transcutánea nerviosa (TENS), se introdujo por primera vez en tratamientos clínicos para el alivio de dolor a través de la teoría de barreras de control o „Gate Control Theory“ de Melzack y Wall, en el año 1965. Davis (1993) y Lewith (1984) explicaron la teoría de barreras de control de la siguiente manera: Una parte de la asta posterior (lat.: Cornu dorsale) en la médula espinal, conocida como „Sustancia gelatinosa“ sirve como „Portal“ para los impulsos a los receptores de dolor. Contiene fibras A mielinadas finas, fibras mielinadas A, que reaccionan a impulsos fuertes y fibras no mielinadas (Fibras C). Cuando un impulso de dolor pasa las fibras A mielinadas finas y las fibras no mielinadas, sin un impulso de las fibras mielinadas A, está el „Portal“ abierto y el paciente siente dolor. A través de un impulso de las fibras mielinadas A, más fuerte, se puede cerrar el „Portal“.

Además se ha comprobado, que la estimulación eléctrica favorece la producción de las sustancias analgésicas naturales propias del cuerpo, como son las endorfinas y las encefalinas. El cuerpo humano produce las endorfinas y las encefalinas, sustancias con propiedades similares a los del opio, para combatir el dolor. Una estimulación de baja frecuencia libera las endorfinas y las encefalinas en el cuerpo.

## ¿Por qué considerar la liberación digital de dolor?


Dolor es una señal de alerta, la necesitamos para darnos cuenta que algo no va bien en nuestro cuerpo. Sin esta señal no podemos saber si algo podría estar perjudicado a nuestro cuerpo. En cuanto identificamos qué es lo que perjudica nuestro cuerpo, el dolor ha cumplido con su objetivo. En caso que el dolor se convierte en algo crónico, puede perjudicar el día a día y la calidad de nuestras vidas.


## ¿Cómo funciona el combate de dolor de manera digital (TENS)?

El combate de dolor de manera digital (TENS) trabaja con impulsos eléctricos no perjudiciales, que se transmiten a través de los electrodos en forma de „pads“ a la piel. Esto reduce el dolor de dos maneras:

- La proyección de las señales de dolor del cuerpo, que normalmente se emiten desde el centro del dolor a través de las fibras nerviosas hacia el cerebro, se interrumpen con el uso de TENS.
- TENS estimula y favorece la producción de las endorfinas, una sustancia analgésica natural de propia producción del cuerpo.

## Contenido y pantalla del dispositivo

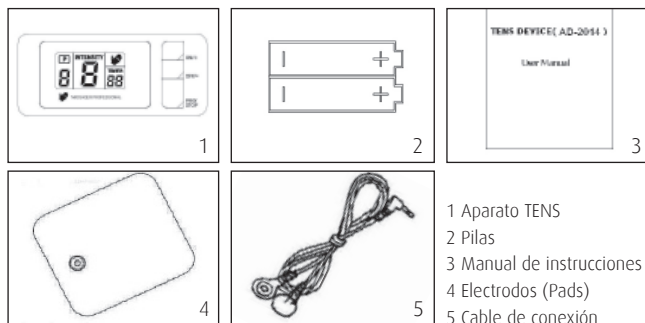

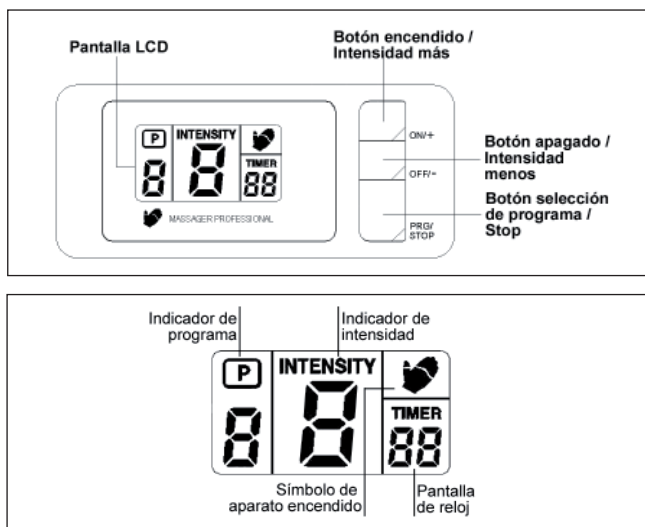

## Uso adecuado

AD-2014 en un aparato TENS, que se puede usar efectivamente para combatir dolor.

### Tratamientos:

- Alivio de dolor en la zona lumbar
- Estimulación muscular
- Activa el flujo sanguíneo
- Reducción de síntomas de fatiga

## Contraindicaciones

El uso del aparato es seguro para todas las personas, con las siguientes exclusiones o personas, que se encuentran bajo tratamiento fisioterapéutico.

- Personas con enfermedades agudas
- Pacientes de cáncer

- Personas con heridas infecciosas
- Personas en época de la menstruación o embarazo
- Personas con enfermedades cardíacas
- Personas con fiebre alta
- Personas con anomalías en la tensión de la sangre
- Personas con sensación reducida de la piel u otras anomalías de la piel
- Personas con anomalías de sentimiento corporal, aparte de los mencionados anteriormente

## Descripción del producto

El AD-2021 es un generador de impulsos, funcionando con pilas, que, a través de impulsos eléctricos, que envía a la piel, llega a los nervios y músculos que se sitúan debajo. Cuenta con un canal, cuya intensidad es individualmente manejable. A un canal se pueden conectar 2 electrodos.

La electrónica del AD-2021 produce impulsos eléctricos, que se diferencian en intensidad, ensanchamiento y frecuencia de los impulsos, dependiendo del programa que se usa. El uso de los botones del aparato es muy fácil y situando los botones de tal manera que no sobresalen, se evitan cambios no intencionados en la configuración inicial del tratamiento.

El AD-2021 coincide con los siguientes estándares:

- EN 60601-1:1990+A1: 1993+A2:1995 (Aparatos eléctricos medicinales - Parte 1: Determinación común para la seguridad incluyendo las características esenciales de rendimiento)
- EN 60601-1-2:2001 +A1 : 2006 (Parte 1-2: Determinación común para la seguridad incluyendo las características esenciales de rendimiento - Norma añadida: Compatibilidad electromagnética - Requisitos y pruebas).

## Especificaciones

Nombre del producto:	TENS terapia de dolor
Modelo:	AD-2014 (Artículo 4504)
Cantidad de programas de tratamamientos:	9
Ámbito de las frecuencias de los impulsos:	2 - 50Hz
Tensión eléctrica inicial:	40V ± 20%(500 Ohm load)
Clasificación:	Alimentación eléctrica interna, Tipo BF, IPX0, No AP o APG, Uso continuo



Medidas del aparato:	Aprox. 120mm x 52 mm x 19mm
Peso:	Aprox. 57,6g (sin pilas)
Alimentación eléctrica:	Pilas 2 x 1.5V Tipo AAA
<b>Temperatura ambiental:</b>	
- en uso:	5°C - 40°C
- Transporte y almacenamiento:	-20 °C - 55 °C
<b>Humedad ambiental:</b>	
- en uso:	<80%
- Transporte y almacenamiento:	<95%
<b>Presión ambiental:</b>	80KPa-105KPa
Durabilidad de las pilas:	Aprox. 2 meses con Pilas alcalinas, uso de 30 min. Diario

## Terapia

Prog.	Parámetros	Función
1	Frecuencia= 2Hz. Ámbito de impulsos 220µs. constante	Golpeteo (Tapping)
2	Frecuencia= 10Hz. Ámbito de impulsos 180µs. constante	Vibración (lenta)
3	Frecuencia= 25Hz. Ámbito de impulsos 145µs. constante	Vibración (rápida)
4	Frecuencia= 50Hz. Ámbito de impulsos 120µs. pulsatorio	Masaje
5	Frecuencia= 80Hz. Ámbito de impulsos 85µs. pulsatorio	Masaje
6	Frecuencia= 100Hz. Ámbito de impulsos 70µs. constante	Amasar
7	Frecuencia= 120Hz. Ámbito de impulsos 55µs. pulsatorio	Masaje
8	Frecuencia= 150Hz. Ámbito de impulsos 35µs. pulsatorio	Masaje
9	Combinación apretar y amasar	Automático



## Atención

- En caso de encontrarse mal o tenga reacciones anormales de la piel, interrumpir el tratamiento. Póngase en contacto con un médico y sigan sus instrucciones.
- Para cambiar la posición de los electrodos, se tiene que apagar el aparato.
- No usar en el cuarto de baño u otras áreas de alta humedad.
- No usar mientras conduce o mientras duerme.
- No doblar exageradamente los cables que conectan los electrodos con el aparato.
- No usar para otros tratamientos, aparte de los indicados por el fabricante.
- Durante su uso, no establezca contacto entre los electrodos y elementos





metalicos, como por ejemplo, cinturones, relojes o collares.

- No usar, si esta conectado con o si se encuentra cerca de aparatos medicinales de alta frecuencia.
- Se recomienda estar especialmente atento en casos que se use el aparato cerca de teléfonos móviles encendidos.
- No usar el aparato TENS cerca de aparatos de onda corta o microondas. La tensión de salida del aparato TENS se puede ver afectada.
- El aparato TENS esta concepcionado para adultos. Bajo ningún concepto se puede aplicar a bebes o niños pequeños. Para aplicar a niños más mayores por favor contacte antes con un fisioterapeuta u otros médicos.
- El aparato puede no realizar su funciones correctamente o provocar riesgos de seguridad, si no se almacena en las condiciones de temperatura y humedad indicados por el fabricante.
- No aplicar al corazón, en zonas íntimas o piel enferma.
- Pacientes con aparatos electrónicos implantados, cómo marcapasos cardíacos o desfibriladores, no pueden usar el aparato sin autorización explícita de su medico. Mujeres embarazadas no deben usar el aparato en los primeros 3 meses de su embarazo y después solo con autorización explícita de su médico, comadrona o fisioterapeuta.
- La conexión simultánea de pacientes con aparatos medicinales de alta frecuencia y el aparato TENS, puede causar un cortocircuito en el aparato TENS y dañarlo.
- El uso cerca (p.ej.: 1m) de aparatos de onda corta o microondas puede provocar un rendimiento inestable del aparato TENS.
- La aplicación de los electrodos en el tórax (cerca del corazón) puede conllevar un aumento del riesgo de sufrir fibrilación cardíaca.
- No deje caer el aparato al suelo, ni intente repararlo o modificarlo usted mismo.
- No use electrodos de otro fabricante. Puede provocar un cambio de las # condiciones biológicas y por lo tanto impulsos equivocados.
- Por favor no comparta los electrodos con otras personas, para minimizar el riesgo de infecciones.

## Preparación y consejos para el uso

### 1. Insertar pilas

- a Abra el compartimiento de las pilas en la parte posterior del aparato
- b Inserte dos pilas tipo „AAA“. Por favor tenga cuidado con la polaridad







c Cerrar compartimiento de las pilas



- Pilas recargables no sirven para este aparato.
- Si el aparato no se usa en un tiempo superior a un mes, por favor retire las pilas, para evitar fugas.
- Por favor no mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes.
- No tire las pilas al fuego

### Retirada de aparatos antiguos y pilas

Aparato y pilas tienen que ser reciclados al final de su uso, conforme con las reglas locales virgines.

## 2. Conexión de los cables de los electrodos

- a Inserte el enchufe del cable en el empalme correspondiente del aparato TENS AD-2014. Sujete el enchufe en la parte aislada y empújelo dentro del empalme.
- b Conecte los electrodos con los botones de presión al final del cable. Asegúrese que están bien conectados. Al retirar los electrodos, no tire de los cables, esto puede dañar al cable.
- c Aplicar los electrodos al cuerpo, recomendado por un fisioterapeuta o como anteriormente está indicado en los ejemplos.



- Limpiar el cable con una valleta mojada
- La aplicación ocasional de talco a los cables puede prolongar su vida útil.

## 3. Manual de uso

- a Para encender, pulse el botón „On/+ ...“. El indicador visual de la pantalla LCD, se enciende por un segundo, después el aparato pasa al modo „stand by“ y espera su configuración.
- b Fijese primero en la duración del tratamiento. El estándar está fijado en 15 minutos y no puede ser modificado por el usuario.
- c El programa del tratamiento se puede cambiar a través del botón /PRG/ STOP. Se puede elegir entre 9 programas diferentes. Cada vez que pulsa el botón, se cambia a un número de programa superior. Después de llegar al programa 9, el indicador cambia otra vez al programa 1.
- d „Pulsando el botón „ON/+““ se aumenta la intensidad. El aparato inicia el tratamiento.

Atención: Cada persona reacciona diferente a los diferentes programas,





- por lo tanto intensifique poco a poco y con cuidado. Cuando los impulsos son agradables, no aumente más.”
- e Durante el tratamiento aparece de forma intermitente el símbolo de la mano en la pantalla, hasta que se haya acabado el tratamiento.
- f Al final del tratamiento el aparato se apaga automáticamente

### Limpiar los electrodos (Pads)

- Al retirar el enchufe, aguántelo. No tire del cable
- Para limpiar los electrodos (Pads) use agua limpia o use unas toallitas sin pelusa, para desempañarlos. No use ningún cepillo, ni las uñas, que pueden dañar la superficie de los electrodos.

## 4. Ilustración de la aplicación correcta

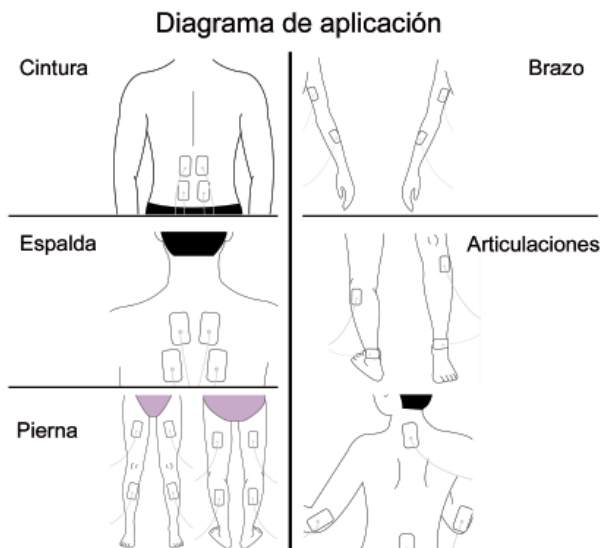

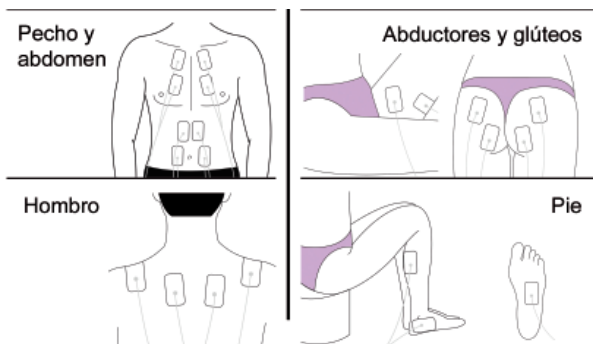

## Solución de problema

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	AYUDA
No se notan los impulsos.	¿Las pilas estan gastadas?	Cambiar pilas.
	¿Las pilas estan bien insertadas?	Insertar las pilas según lo indicado en el compartimiento de las pilas.
	¿El cable esta bien conectado?	Conectar correctamente el cable.
	¿Se ha retirado el protector de los electrodos (Pads)?	Retirar el protector de los electrodos (Pads).
Los impulsos son muy flojos.	¿Se pegan bien los electrodos (Pads) en la piel?	Pegar bien los electrodos (Pads) en la piel.
	¿Se solapan los electrodos (Pads)?	Retirar los electrodos (Pads) de la piel y pegarlos de nuevo.
	¿Estan sucios los electrodos (Pads)?	Limpiar los electrodos (Pads) o usar nuevos.

Los impulsos son muy flojos.	¿La intensidad es demasiado baja?	Regular la intensidad en el regulador.
	¿Se han posicionado los electrodos (Pads) correctamente?	Cambiar la posición de los electrodos (Pads)
	Ist die Oberfläche der Elektroden (Pads) beschädigt oder gebrochen?	Die Elektroden (Pads) durch neue ersetzen.
La piel enrojece.	¿La duración del tratamiento es demasiado larga?	Controlar periódicamente cada 10 - 15 minutos.
	¿Los electrodos (Pads) se han secado?	Remojar los electrodos (Pads) con una toallita mojada y usarlos de nuevo. Fijar bien.
	¿Se pegan bien los electrodos (Pads) en la piel?	Pegar bien los electrodos (Pads) en la piel.
	¿Están sucios los electrodos (Pads)?	Limpiar los electrodos (Pads) o usar nuevos.
	¿La superficie de los electrodos (Pads) está dañada o rota?	Reemplazar los electrodos (Pads) por nuevos.
Los impulsos de interrumpen.	¿Se han separado los electrodos (Pads) de la piel?	Apagar aparato y fijar los electrodos (Pads) bien en la piel.
	¿Se han desconectado los cables?	Apagar aparato y conectar los cables de nuevo.
	¿Se han gastado las pilas?	Reemplazar las pilas por nuevas.

## Mantenimiento

- No dejar caer el aparato o someter a golpes fuertes.
- Evitar las temperaturas altas o insolación. No sumergir en agua u otros



líquidos, el aparato se puede dañar.

- Si el aparato se almacena en sitios fríos, caliéntelo a temperatura ambiental antes de iniciar un tratamiento.
- No intente desmontar el aparato.
- Si el aparato no se usa durante un prolongado período, retire las pilas.
- Para limpiar el aparato use una valleta seca y suave. No utilizar productos de limpieza agresivos.
- Los componentes dentro del aparato no pueden ser revisados por el usuario. Un plano del circuito eléctrico, la lista detallada de las piezas u otras descripciones o informaciones, que se necesitan para el arreglo, de la mano de personas cualificadas se pueden obtener poniéndose en contacto con nosotros.
- Para asegurar la habilidad de pegarse de los Pads el máximo de tiempo posible, límpielos con una valleta húmeda, sin pelusa ni polvo.
- Después del tratamiento, volver a pegar los protectores a los pads.
- Los electrodos son artículos que se desgastan. Cuando pierden su habilidad de pegarse, tienen que ser cambiados por nuevos electrodos (Pads).



## Descripción de los símbolos del aparato



Símbolo de aviso de leer el manual de instrucciones.



Símbolo para los aparatos clasificados tipo „TYP BF“.



Este producto no puede ser desechado al final de su vida útil en la basura doméstica, sino que tienen que ser llevados a un punto de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el aparato, el manual de instrucciones o el embalaje lo indica. Por favor pregunte en el ayuntamiento por el punto de reciclaje competente.



Símbolo para el fabricante



Conformidad con la directiva 93/42/EEC



## Garantía

La garantía es de 24 meses a partir de la fecha de adquisición por parte del cliente, de defectos de fabricación en material y calidad. Cómo prueba sirve el ticket de la compra. La garantía solamente es vigente, si se han seguido todas las advertencias del manual de instrucciones. En casos de daños por uso de violencia, abuso y uso inadecuado o servicio de personas no autorizadas, la garantía expira.

Estimados clientes,  
en el caso de que el artículo adquirido por Usted de algún problema, por favor no lo envíe de vuelta en seguida, póngase primero en contacto con nuestra línea de atención al cliente 0049 69/954061-24, ya que se a lo mejor podría solucionarse el problema ocurrido. En el caso de que no se pueda solucionar el problema, Usted tiene la posibilidad que dentro de las fronteras de ALEMANIA y en casos de productos con un valor superior a 40€, dentro de la determinación de la garantía, le vamos a buscar el producto a su casa para comprobarlo sin coste alguno. En este caso necesitaremos su dirección. Nos la puede indicar a través del telefono de atención al cliente antes indicado o por escrito a través de e-mail: [technik@hydas.de](mailto:technik@hydas.de). Por favor prepare la devolución lista para su envío y añada tanto una copia del ticket de compra, como una descripción de los defectos. Les agradecemos su comprensión, ya que paquetes enviados forzosamente no pueden ser aceptados.

Su atención al cliente de Hydas

### Dirección para asuntos relacionados con la garantía y servicio posventa:

Hydas GmbH • Am Hohlen Weg 37 • 34369 Hofgeismar - Alemania  
Tel.: +49 69 - 95 40 61 13 • Fax: +49 69 - 95 40 61 40  
e-Mail: [info@hydas.de](mailto:info@hydas.de) • <http://www.hydas.de>



#### VERWALTUNG

Hydas GmbH & Co.KG  
Hirzenhainerstr. 3,  
60435 Frankfurt/M., Germany  
Tel.:069/9540610,  
Fax: 069/95406140  
e-mail: info@hydas.de

#### FABRIKATION/LOGISTIK

Hydas GmbH & Co.KG  
Am Hohlen Weg 37,  
34369 Hofgeismar, Germany  
Tel.:05671/99230,  
Fax: 05671/992340  
e-mail: info@hydas.de

#### OFFICE USA

Hydas Inc.  
P.O. Box 420, Hershey, PA. 17033  
Tel. 717-533-5583  
Fax 717-533-5548  
Warehouse: 1810 Church Rd.,  
Hummelstown, PA. 17036 U.S.A.  
e-mail: info@hydas.com

Vers1\_4504\_GAz\_0512